

# Auditbase

# Bruksanvisning

---

Version 6.10.0



Auditdata

## Meddelande om upphovsrätt

Ingen del av denna användarhandbok eller detta program får kopieras, lagras i ett elektroniskt system för lagring och informationssökning, eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt medgivande från Auditdata A/S.

## Copyright © 2026, Auditdata A/S

All information, allt bildmaterial och alla data i denna handbok bygger på den vid publiceringstillfället senast tillgängliga informationen.  
Auditdata A/S förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar.

## Handelsnamn/Produktnamn

AUDITBASE/2003 Auditbase

## Teknisk support

Kontakta leverantören.

# Auditdata

Auditdata A/S, Wildersgade, Danmark. Tel. +45 70 20 31 24. E-postadress:  
[support@auditdata.com](mailto:support@auditdata.com)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INLEDNING</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2 FÖRKORTNINGAR OCH TERMER</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>3 ANVÄNDA SYMBOLER</b>                                          | <b>7</b>  |
| <b>4 ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>5 AVSEDD ANVÄNDNING</b>                                         | <b>9</b>  |
| 5.1 Avsedd medicinsk personal och syfte                            | 9         |
| 5.2 Avsedd användarprofil                                          | 10        |
| 5.3 Auditbase moduler                                              | 11        |
| 5.4 Enda Aktuella Patienten                                        | 14        |
| 5.5 Begränsningar och inskränkningar för användningen av Auditbase | 14        |
| 5.6 Klinisk fördel                                                 | 15        |
| <b>6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER</b>                                     | <b>16</b> |
| 6.1 Varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer        | 16        |
| 6.2 Var uppmärksam                                                 | 17        |
| 6.3 Kvarstående risker och oönskade sidoeffekter                   | 18        |
| <b>7 INSTALLATION, UPPSTART OCH DRIFT</b>                          | <b>19</b> |
| 7.1 Installation och avinstallation                                | 19        |
| 7.2 Uppstart                                                       | 19        |
| 7.3 Förberedelser för stark autentisering                          | 19        |
| 7.4 Logga in                                                       | 22        |
| 7.5 Logga ut med F2                                                | 27        |
| 7.6 Lösenord                                                       | 27        |
| 7.6.1 Ändra lösenord                                               | 27        |
| 7.7 Automatisk utloggning (Skärmsläckare)                          | 29        |
| 7.8 Ändra temat för användargränssnittet (UI)                      | 30        |
| 7.9 Moduler                                                        | 31        |
| 7.10 Installation av Noah-moduler                                  | 32        |
| 7.11 Sortera och spara listskärmbilder                             | 33        |
| 7.12 Sortera kolumner och göra textsökning                         | 35        |
| 7.13 Verktygsfält och startfönster                                 | 35        |
| 7.14 Navigerings Rutor                                             | 37        |
| 7.15 Användarfavoriter                                             | 38        |
| 7.16 Öppna, stäng och autodölj Navigeringsområdet                  | 39        |
| 7.17 Rutor Konfiguration                                           | 40        |
| 7.18 Utskrift och omdirigering av filstyrning                      | 41        |
| 7.19 Hjälp                                                         | 42        |
| 7.19.1 Innehåll                                                    | 42        |
| 7.19.2 Dokumentation                                               | 43        |
| 7.19.3 Support                                                     | 43        |
| 7.19.4 Profilering                                                 | 46        |
| 7.19.5 Om Noah                                                     | 48        |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.19.6 Om Auditbase .....                                                | 48         |
| 7.20 Tillgänglighetsalternativen .....                                   | 48         |
| 7.21 Fullständig operativ vägledning .....                               | 49         |
| 7.22 Patientjournaler vid användning av laptop-synkronisering .....      | 50         |
| 7.23 Sluta använda Auditbase och avyttring .....                         | 50         |
| <b>8 FELSÖKNINGSGUIDE .....</b>                                          | <b>52</b>  |
| <b>9 OPERATÖRSROLLER OCH AKTIVITETER .....</b>                           | <b>57</b>  |
| 9.1 Operatörsroller .....                                                | 57         |
| 9.2 Operatörsaktiviteter och rekommenderad frekvens .....                | 57         |
| <b>BILAGA A .....</b>                                                    | <b>A-1</b> |
| A.1 Serverspecifikationer .....                                          | A-1        |
| A.1.1 Hårdvarukrav .....                                                 | A-1        |
| A.1.2 Mjukvarukrav .....                                                 | A-2        |
| A.2 Klientdatorns specifikationer (inklusive Noah installation) .....    | A-3        |
| A.2.1 Hårdvarukrav .....                                                 | A-3        |
| A.2.2 Mjukvarukrav .....                                                 | A-4        |
| A.3 Klientdatorns specifikationer (utan Noahinstallation) .....          | A-5        |
| A.3.1 Hårdvarukrav .....                                                 | A-5        |
| A.3.2 Mjukvarukrav .....                                                 | A-5        |
| A.4 Säkerhetsspecifikationer .....                                       | A-6        |
| A.4.1 Kryptering .....                                                   | A-6        |
| A.4.2 Antivirus och antimalware .....                                    | A-6        |
| A.4.3 Windows-autentisering och lösenord .....                           | A-7        |
| A.4.4 Säkerhet för utskrifter .....                                      | A-7        |
| A.4.5 Portskanning .....                                                 | A-7        |
| A.5 Nätverksspecifikationer .....                                        | A-7        |
| A.5.1 Nätverksspecifikationer .....                                      | A-7        |
| A.5.2 Namngivning av klientarbetsstationer .....                         | A-7        |
| A.6 Risker för utrustning och nätverk samt konfigurationsändringar ..... | A-8        |
| A.7 Informationsflöde .....                                              | A-9        |
| A.7.1 Informationsflöde - diagram .....                                  | A-9        |
| A.7.2 Informationsflöde - tillträden .....                               | A-9        |
| A.7.3 Informationsflöde - beskrivning .....                              | A-11       |
| <b>BILAGA B .....</b>                                                    | <b>B-1</b> |
| B.1 Tillverkare och System Data .....                                    | B-1        |
| B.2 Tolkning av etikettecken .....                                       | B-2        |
| B.2.1 Etikettexempel .....                                               | B-2        |
| B.2.2 Nyckel för märkning .....                                          | B-2        |

# 1 Inledning

Syftet med detta dokument är att ge instruktioner om hur du ställer in, installerar och konfigurerar mjukvaran Auditbase. Den innehåller också viktig information om säkerhetsåtgärder och felsökning.

Auditbase består av ett antal moduler som speglar verksamheten på en hörselaudiologisk klinik.

Beroende på dina köpta licenser kan kanske vissa av modulerna som beskrivs i detta dokument inte vara tillgängliga i din version av Auditbase-mjukvaran. Kontakta din distributör för mer information om licenserna.

Modulerna i Auditbase system är försedda med onlinehjälp. För att aktivera den här funktionen, tryck på F1, Skift+F1 eller välj Hjälps i menyn.



eIFU  
Indicator

Elektronisk bruksanvisning hittar du här - [Bruksanvisning \(auditdata.com\)](https://auditdata.com/bruksanvisning).

För en detaljerad beskrivning av modulerna i Auditbase, se vår [Användarhandbok](#).

## Ansvarsfriskrivning:

Detta dokument är inte avsett att vara en fullständig referens. För detaljerad information, se användar- och administratörsguiderna efter installation av Auditbase-mjukvaran.

## 2 Förkortningar och termer

| Term | Definition                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB   | Auditbase                                                                                                       |
| ABR  | Hjärnstamsaudiometri (ett hörseltest för att avgöra hur innerörat (cochlea) och hjärnans hörselbanor fungerar). |
| BSA  | British Society of Audiology                                                                                    |
| OAE  | Otoakustiska Emissioner (ett hörseltest för att avgöra hur innerörat (cochlea) fungerar).                       |
| QRP  | Teknologi för att skapa rapporter med hjälp av Team Developer                                                   |
| RPT  | Teknologi för att skapa rapporter med hjälp av Crystal Reports                                                  |
| IFU  | Bruksanvisning                                                                                                  |

### 3 Använda symboler

Symboler används i systemet och i dokumentationen på platser där detta krävs enligt föreskrifter eller där det helt enkelt är bekvämare på grund av begränsat utrymme.



*Allmänna varningar*



*Varning i Om-rutans märkning*



*Tillverkarens adress*



*CE-märkning och nummer på anmält organ*



*Medicinteknisk produkt*



*Elektronisk bruksanvisning (e-IFU)*

## 4 Överensstämmelse med standarder

Auditbase-applikationen uppfyller följande standarder:

| Nr | Nomenklatur                                      | Namn på standard                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ISO/IEC 27001:2013 +C1:2014 +C2:2015 (Utgåva 2)  | Informationsteknik - Säkerhetsteknik - Managementsystem för informationssäkerhet - Krav                                                        |
| 2  | ISO/IEC 27002:2013 +C1:2014 +C2:2015 (Utgåva 2). | Informationsteknik - Säkerhetsteknik - Tillvägagångskod för informationssäkerhetskontroller.                                                   |
| 3  | EN 60601-1-6:2010 +AMD1:2013 CSV (Utg 3.1)       | Medicinsk elektrisk utrustning - Del 1-6: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda - Kollateral standard: Användbarhet |
| 4  | IEC 62304:2006 + AMD1:2015 CSV (Utgåva 1.1),     | Programvara för medicinteknisk produkt – Programvarans livslängdsprocesser                                                                     |
| 5  | IEC 62366-1:2015 (Utgåva 1.0)                    | Medicintekniska produkter - Tillämpning av användbarhetsteknik på medicintekniska produkter                                                    |
| 6  | EN ISO 14971:2019 (Utgåva 3.0)                   | Medicintekniska produkter - Tillämpning av riskhantering på medicintekniska produkter                                                          |
| 7  | EN ISO 13485:2016 (Utgåva 3.0)                   | Medicintekniska produkter - Kvalitetsledningssystem - Krav för reglerande ändamål                                                              |
| 8  | MDD - 93/42/EEG (M5/2007)                        | Medicintekniska direktivet (rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter)                                        |
| 9  | MDR (EG) 2017/745                                | Förordning för medicintekniska produkter (MDR, Medical Devices Regulation)                                                                     |
| 10 | IEC 82304-1:2016                                 | Hälsovårdsprogramvara – Del 1: Allmänna krav för produktsäkerhet                                                                               |
| 11 | DCB 0129 Amd 24/2018 Klinisk riskhantering       | Klinisk riskhantering: dess tillämpning vid tillverkning av IT-system för hälsovård                                                            |



## 5 Avsedd användning

Auditbase är ett "Sjukhus Informations System"

- För lagring och överföring av elektroniska patientjournaler, arkivering av dokument och data relaterade till en specifik patient.
- Olika moduler för registrering, visning och ändring av kliniska patientdata.
- Den lagrade informationen är delvis avsedd för att underlätta beslutsfattande för korrekt behandling.
- Samtidigt är Auditbase inte avsett som det enda sättet för diagnostik.

| Produktnamn       | Handelsnamn | MDR Klass    | MDR Regel | GMDN  | Grundläggande UDI-DI |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|-------|----------------------|
| 2003<br>Auditbase | Auditbase   | Klass<br>IIb | 11        | 61087 | 05711781DHF2003-12Z  |

Enligt MDD klass I.

### 5.1 Avsedd medicinsk personal och syfte

Auditbase är uppdelat i separata moduler vilka installeras i ett enda paket. Vissa moduler har en lite annorlunda medicinsk population och syfte än andra och därför beskrivs de separat här.

Auditbase-modulerna används av audiologi, implantat-team, öronkirurger på allmänna och privata sjukhus. Klinikerna tillhandahåller tjänster till patienter med hörselnedsättning.

Auditbase är inte indikerat som ett enda medel för diagnos.

Auditbase Audiogram-modulen är en programvaruenhet avsedd för att registrera mätningar av hörselnedsättning till hjälp vid beslutsfattandet om den rätta behandlingen för denna hörselnedsättning och om en specifik typ av hörapparat är lämpad för patienten.

Auditbase Implantat-modulen är en programvaruenhet avsedd för att registrera mätningar av hörselnedsättning och tal och språkdiskrimination till hjälp vid beslutsfattandet om den rätta behandlingen för denna hörselnedsättning och om en specifik typ av (cochlear-) implantat är lämpat för patienten.

Auditbase Operation-modulen används till att registrera vad som har gjorts vid varje stadium under patientens bana. Auditbase Operation-modulen används inte i processen att ställa diagnos för den rekommenderade behandlingen av klientens hörsel, utan den används till att manuellt registrera och övervaka de beslut som har fattats och åtgärder som har vidtagits.

Auditbase OTO-bildmodulen används för att lagra patientens otoskopibilder tillsammans med kommentarer. Öronkirurger kan också markera det skadade området av trumhinnan på bilden för att få ett indikativt procentvärde för det området. De data som lagras i Auditbase OTO-bildmodulen kan användas vid diagnostisering och för att fastställa den lämpligaste behandlingen för patientens hörseltillstånd.

ABR/OAE-modulen används till att manuellt registrera resultaten för diagnostiska eller screening ABR- och OAE-mätningar. Resultat från mätningarna kan användas i processen att ställa diagnos för den rekommenderade behandlingen av klientens hörsel.

Auditbase Frågeformulär-modulen används till att manuellt registrera resultaten från audiologiska frågeformulär före och efter behandling. Resultat från frågeformulären kan användas i processen att ställa diagnos för den rekommenderade behandlingen av klientens hörsel.

Alla moduler kan användas i alla installationer.

## 5.2 Avsedd användarprofil

Auditbase är uppdelat i separata moduler **vilka installeras i ett enda paket**. Vissa moduler har en lite annorlunda avsedd användarprofil än andra och därför beskrivs de separat här.

### Auditbase Audiogrammodul

Auditbase Audiogrammodul används vanligtvis av audionompersonalen på en audiologisk klinik. Typiska användarroller är följande:

- Audionomer;
- Användare i skrivskyddat läge (Viewer), vanligtvis inte på audiologiavdelningar.

### Auditbase Implantatmodul

Implantatmodulen används av implantatteam på offentliga sjukhus. Typiska användarroller är följande:

- Logoped;
- Dövlärare;
- Audionomer;
- Implantatkirurger.

### Auditbase Kirurgimodul

Kirurgimodulen används av öronkirurger på offentliga sjukhus. Typiska användarroller är följande:

- Öronkirurger.

### Auditbase OTO-bildmodul

OTO-bildmodulen används av audionomer och öronkirurger på offentliga sjukhus. Typiska användarroller är följande:

- Audionomer;
- Öronkirurger.

### **Auditbase ABR/OAE-modul**

ABR/OAE-modulen används av implantatteam på offentliga sjukhus. Typiska användarroller är följande:

- Audionomer.

### **Auditbase Frågeformulärsmodul**

Frågeformulärsmodulen används av implantatteam på offentliga sjukhus. Typiska användarroller är följande:

- Logoped;
- Dövlärare;
- Audionomer;
- Hörselterapeuter.

Andra moduler i Auditbase används vanligtvis av personalen på en audiologisk klinik. Typiska användarroller är följande:

- Kontorpersonal;
- Audionomer;
- Hörselterapeuter;
- Reparationsspecialister;
- Praktikanter;
- Systemadministratörer.

Användare i skrivskyddat läge (Viewer), vanligtvis inte på audiologiavdelningar.

## **5.3 Auditbase moduler**

### **Patientinformation**

Inkluderar avancerad sökfunktion, möjlighet att lagra en bedömningsöversikt för en patient, sammanslagning av patientdata, patientgruppsdefinitioner, husläkare och patientdemografi, automatiserade meddelanden med mera.

### **Besöksskärmar, historik och resultatregistrering för implantatteam**

Informationsregistrering för Implantatteam

### **Patienttester och frågeformulär**

Tester och frågeformulär som används av audionomer, logopeder och dövlarare.

### **Professionella kontakter inklusive husläkare**

Professionella kontakter inklusive husläkare, ambulerande förskolelärare inom hörselvården, skolor etc.

### **Bokningsmodul, patientkommunikation och resursplanering**

Omfattande besöksbokningsadministration inklusive avancerad sökfunktion, uppgiftsrelaterad tidsfördelning, väntelistor och kallelsebrev, gruppbokningar, resursanvändning och länk till remisser.

### **Remiss och väntelista**

Omfattande, konfigurerbar och intuitiv väntelista och remissmodul med start-, stopp- och avstängningsalternativ för att hjälpa till att följa myndighetsföreskrifter.

### **Professionell audiometri**

Det har den fullständiga möjligheten att utföra hörseltester med direkta gränssnitt till tillverkares specifika mätningstrustning och till utrustning med Noah-kompatibla moduler.

För tillverkares specifika mätningstrustnings kommunikationsprotokoll finns stöd för att kommunicera med den utrustningens styrprogramvara.

Kommunikation med följande programvara har stöd:

- OtoSuite kontrollpanel;
- Itera kontrollpanel;
- Primus kontrollpanel;
- AC440 kontrollpanel.

För Noah-certifierade moduler, kan all information som lagras i Noah-moduler från alla tillverkare som tillhandahåller en Noah-certifierad audiometer och modul lagras i Auditbase och är åtkomlig för audiologen.

För Orbiter audiometer och Zodiac tympanometer är det begränsat till att endast importera mätningresultat utan att styra enheten.

För anvisningar och begränsningar att använda alla 3:e parts audiometrar som nämns ovan, se tillverkarens användarhandbok för den programvaran och audiometerens användning (levereras inte med Auditbase).

Det finns support för att lagra och hämta upp detaljerade mätningresultat inklusive audiogramjämförelse med trendgrafer. Audiometri-modulen har flera utskriftsalternativ. Ytterligare funktioner inbegriper utökade mätningar, rapporter med audiogram- och tympanometridata, detaljerad bedömningsplan för tinnituspatienter eller andra problem (t.ex. aurikulär rehabilitering), protokoll för vestibulär testning och pediatrik.

### **Andra mätningar**

OAE- och ABR-mätningar

### **Grafiskt tal**

Mätresultat för taluppfattning tillämpas i detaljerad grafisk form med normativa kurvor.

### **Journalmodul**

Hantering av patientjournaler inklusive signerade och osignerade journaltexter, möjlighet att ställa in automatiskt genererade journalåtgärder, användning av journalmallar, omfattande formatering och textredigering baserad på användarrättigheter.

### **Uppgiftslista**

Definiera prioriterade patientrelaterade eller allmänna uppgifter och lägg till påminnelser och andra anteckningar med hänvisning till en enskild eller generell personal. Varning kan ställas in till på skärmen och/eller vid inloggning.

### **Behandlingssammanfattning**

Konfigurerbara patientöversikter (t.ex. valda journalanteckningar, audiogrambild, bedömning eller pediatrik).

### **Pediatrik modul**

Val av specifika pediatrika funktioner såsom automatisk beräkning av ålder baserat på födelsedatum, hantering av familje- och kontaktinformation, remisser, audiogramdata och fritextkonsultation.

### **Lagermodul**

Hantering av serienummer- och antalsstyrda artiklar inklusive avancerad sökfunktion och automatiserad artikel som utlämnas från Lager efter anpassning i Noah. Hörapparater kan anpassas med Noah-kompatibla moduler. Använd streckkodsläsare för snabb registrering av lager. Andra funktioner inkluderar användarsäker redigering av lagerstatus, order- och lagertransaktionsöversikt samt inköpsorder, apparathistorik över lån och retur och hörselgångsinsatser.

### **Streckkod lagerverifiering**

Verifiera lager med en streckkodsläsare för ett snabbt och enkelt sätt att inventera.

### **Auditbase Incheckning**

Patienter kan självregistrera sig vid ankomst via en pekskärm.

### **Tidboksöversikt**

En översikt över patient- och andra bokningar per plats.

### **Plats- och avdelningsfiltrering**

Hantering av enskilda platser eller avdelningar med användar- eller arbetsstationsrelaterade väntelistor, mötes-/bokningssymboler, brev, lagertyper och dokument specifika för varje plats.

#### **Import/exportmodul**

Elektroniskt utbyte av data till exempel i samband med patientöverföring till annan region eller utbyte av data med andra system för vidare anpassning.

#### **Verkstadsmodul**

Hantering av reparationer till/från extern part (standardversion) och hantering av såväl interna som externa reparationer, fakturering, expedition med mera (fullversion).

#### **Modulen Dokument och bilagor**

Hantering av dokument och bifogade filer för patienter samt sådana som inte är relaterade till patienter t.ex. dokumentmallar; med möjlighet att göra patientrelaterade dokument baserat på mallar.

#### **Statistikmodul**

Fördjupad statistik för besök, remisser och lager.

#### **OTO-bildmodul**

Hanterar otoskopibilder tillsammans med kommentarer och skissresultat för öronkirurgi- och audiologipatienter.

## **5.4 Enda Aktuella Patienten**

Den globala patienten är alltid aktuell oavsett vilken modul som är öppen. Detta görs med hjälp av ett internt numeriskt patient-ID. Patient-ID är oberoende av de yttre referenser som används av kunder och användare.

## **5.5 Begränsningar och inskränkningar för användningen av Auditbase**

- Auditbase får endast nyttjas av användare som uppfyller kraven enligt den avsedda användarprofilen som beskrivs ovan.
- Auditbase får endast användas av utbildade användare som har läst och förstått denna bruksanvisning.
- Auditbase är avsedd att användas i audiologiska kliniker.
- Användarnamn, registrerade i systemet, måste vara unika eftersom Noah inte fungerar för användare med flerfaldiga namn.

## 5.6 Klinisk fördel

Användningen av Auditbase ger en klinisk fördel därför att det bidrar till diagnosen av hörselnedsättningar och deras behandling i tid.

## 6 Säkerhetsföreskrifter

### 6.1 Varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer



Var noga med att följa säkerhetskraven som anges i denna instruktion, både under installation och användning av detta system.

- Observera att Auditbase är avsedd att användas som en del av en övergripande diagnos- och behandlingsprocess. Beslut bör inte fattas som kan påverka patientsäkerheten utan hänvisning till andra sätt och bedömningsmetoder. Varje fynd bör bekräftas med patienten innan åtgärder vidtas, och användarna bör vara uppmärksamma på att bekräfta alla data med patienten som de misstänker är felaktiga.
- Systemet som användaren använder måste uppfylla dom lägsta ställda systemkraven för att minska risken att patientdata inte kan läsas för databasen där nätverksfördröjningen är för hög eller skärmen inte passar alla data där skärmapplösningen är för låg.
- PAS-uppdatering: se till att patienten är densamma som avses innan du sparar.
- För att undvika att obehöriga får åtkomst till systemet, se till att ditt lösenord är tillräckligt säkert när det gäller längd, komplexitet och oförutsägbarhet och avslöja INTE det för någon.
- Av säkerhetsskäl måste systemadministratörens lösenord ändras vid första användningen och får bara delas med personer tilldelade att göra ändringar i konfigurationen. Detta lösenord måste ändras regelbundet.
- Om du har glömt ditt lösenord måste du omedelbart kontakta din systemadministratör för att ändra det. Om du tror att du har blivit av med en notis om det och någon annan kan ha hittat den måste du omedelbart informera systemadministratören.
- Dubbelkolla att du tilldelar/associerar rätt rättigheter/roll, annars kan användare göra olämpliga åtgärder i systemet.
- För att förhindra obehörig åtkomst till patientdata får användarna inte lämna sin dator utan uppsikt.
- Allmän patientsökning: var försiktig när du exporterar resultaten till patientsökningen till CSV eftersom du riskerar att läcka PID (patientidentifierbara data).
- När du använder Noah Snabb datavisning, glöm inte att stänga dokumentet Snabb datavisning manuellt eftersom Auditbase inte kan stänga det automatiskt. Var försiktig med patientinnehåll, Auditbase kan inte varna användare för att ett Snabb datavisningsdokument fortfarande öppnas för en patient när användare väljer en andra patient.
- Kontrollera att e-postadressen är korrekt på skärmen med patientinformation; att ange en felaktig e-postadress kan medföra att patientens data skickas till fel adressat.
- Auditbase är avsett som ett system för alla patienter från små barn till äldre vuxna. Det finns inga kontraindikationer som indikerar några grupper av patienter som det inte ska användas med.
- Användare som exporterar listan med Vidaresända remisser till CSV måste fortskrida med försiktighet vid hantering av filen för att undvika förlusten/läckan av patientdata.



- Medicinska patientmeddelanden får inte användas som det enda diagnostiska verktyget. När en patient vidarelämnas för ytterligare behandling måste sådana meddelanden granskas av kvalificerad personal tillsammans med andra patientdata innan några åtgärder vidtas för patienten.
- Auditbase funktion kan inte försämrats när programvaran används med annan medicinsk utrustning såsom hjärtstimulatorer, högfrekventa elektrokirurgiska enheter, defibrillatorer, utrustning för kortvågsterapi etc. och utsätter inte patienten för fara. Ytterligare utrustning som kan användas med Auditbase måste uppfylla kraven i IEC 60601-1.
- Auditbase kan fungera i kombination med skrivare och streckkodsläsare. Auditbase fungerar på ett säkert sätt med dem och försämrar inte enheternas specificerade prestanda när standard Windows drivrutiner och programvara används. Ett villkor är att streckkodsläsare måste kunna simulera skrivning på tangentbordet och måste kunna införa prefix- och suffixtillägg i informationssträngen. Det finns en begränsning att Zebra-skrivare inte kan stödjäs av Auditdata för utskrift av etiketter.
- Det är viktigt att affärsprocessen säkerställer att utbildning finns på plats för alla användare innan användningen av Auditbase påbörjas.
- Det är viktigt att affärsprocessen säkerställer att adekvata resurser tillhandahålls för klientdatorer enligt minimisystemkraven. Checklistan för före-installation eller före-uppgradering av Auditbase måste vara noggrant slutförd.
- Om en kund slutar använda Auditbase och vill avyttra det måste försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika osäker kassering av media som innehåller PID (patientidentifierbar data) och för att undvika förstörande av medicinska data innan det är kliniskt säkert att göra det enligt lokala lagar. Se avsnittet "[Sluta använda Auditbase och avyttring](#)".
- Elektroniska instruktioner tillhandahålls istället för pappersinstruktioner. Alla användare har tillgång till den elektroniska versionen av IFU som är tillgänglig från själva applikationen. Användare med tillgång till en skrivare kan därför själva skriva ut en papperskopia av bruksanvisningen (IFU) från applikationen.
- Om kunden behöver en papperskopia av IFU kan den tillhandahållas inom 7 dagar efter användarens begäran till [support@auditdata.com](mailto:support@auditdata.com).
- Användare som exporterar rekvisitionslistan till CSV måste fortsätta med försiktighet vid bearbetning av filen för att undvika förlust/läckage av patientdata.
- Användare som exporterar säkerhetsloggen till CSV måste fortsätta med försiktighet när de bearbetar filen för att undvika förlust/läckage av patientdata.
- När du använder Oto-bildmodulen måste användarna se till att alla uppladdade, importerade eller inklistrade bilder är korrekt kopplade till rätt patient.
- Oto-bildmodulen innebär den manuella skissprocessen och trumhinnans standardform som oval att den beräknade procentandelen endast är en uppskattning och inte bör betraktas som en exakt mätning.

## 6.2 Var uppmärksam

- BSA-skuggmaskeringssymboler ingår inte i Noah-standard: de kommer därför inte att överföras till Auditbase när audiogrammet sparas i Noah.

- När du arbetar i någon modul innan du fortsätter med rapportering eller behandlingsbeslut, se till att rätt patient är vald för att undvika att göra en felaktig rapport eller behandling.
- Skapade vyer bör endast användas på den skärmupplösning de designades för, för att undvika problem som osynliga data och ofullständiga paneler. När du konfigurerar patientsammanfattningen på en högupplöst skärm, observera att den kanske inte visas korrekt på skärmar med lägre upplösning, vilket eventuellt utelämnar viss information. För att undvika förvirring rekommenderas det att inkludera upplösningsstorleken i konfigurationsnamnet om den är särskilt hög.

## 6.3 Kvarstående risker och oönskade sidoeffekter

Auditbase har inga kvarstående risker med en oacceptabel nivå och oönskade sidoeffekter; alla risker har minskats till en acceptabel nivå genom processerna för systemimplementering och dokumentation. *Observera att för att hålla eventuella risker på denna acceptabla nivå så måste alla varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer listade ovan noggrant studeras och följas av användaren i det dagliga arbetet.*

Observera även att den Kliniskt säkerhetsansvariga på platsen har den Kliniska säkerhetsfallrapporten för Auditbase, där kliniska risker får en utförligare beskrivning, och den övergripande sammanfattningen av kliniska risker för Auditbase är beskriven.

## 7 Installation, uppstart och drift

### 7.1 Installation och avinstallation

- För fullständiga steg-för-steg-riktlinjer för hur man installerar Auditbase-systemet, se Auditbase Complete Installation Guide (Auditbases fullständiga installationsguide).
- Installationen måste göras av eller tillsammans med Auditdatas supportpersonal. Installationsinstruktioner finns i Complete Auditbase installationsguide och Quick Auditbase installationsguide (Snabb installationsguide för Auditbase) som finns på medlevererade CD:n.
- Det finns inga specifika krav på gränssnittssystem vilka måste beaktas vid installationstillfället. Det finns valfria gränssnittskrav som kan diskuteras med din Auditdata-representant.
- Avinstallering av Auditbase: Se *Auditbase Complete installation guide*.
- Minimi- och rekommenderade specifikationer för klient och server beskrivs i [appendix A](#) till detta dokument.

### 7.2 Uppstart


- Systemadministratören som det hänvisas till i detta dokument använder inloggningen SYSADM och ett tilldelat lösenord.
-  Av säkerhetsskäl måste detta lösenord ändras vid första användningen och får bara delas med personer tilldelade att göra ändringar i konfigurationen. Lösenordet måste ändras regelbundet.
- Kunder rekommenderas att använda integration med Active Directory för inloggning på Auditbase så att lösenord inte används, och de kan använda multifaktoriserad autentisering för att säkra inloggningen med Active Directory.
- Omedelbart efter den första installationen av Auditbase måste man tänka över alternativ för säkra lösenordskonfigurationer och automatisk utloggning. Se motsvarande avsnitt nedan.
- Beroende av andra tillämpningar: Auditbase fungerar, för att bearbeta dokument, med MS Word. Därför måste, om bearbetning av dokument planeras på arbetsstationen, MS Word installeras på den arbetsstationen i fråga.
- Mer information om hur man konfigurerar Auditbase finns i *Auditbase Admin Guide*.

### 7.3 Förberedelser för stark autentisering

#### Ställa in användaridentifierare

Först måste systemadministratörer välja en identifierare för användaridentifiering och konfigurera inställningarna på sidan Extern Autentisering i Auditbase Administration. Identifieringsalternativen inkluderar:

- Anv. global ID (Globalt användar ID)
- Telefonnummer
- Kontonamn i Active Directory
- E-post
- Användarens globala ID 2

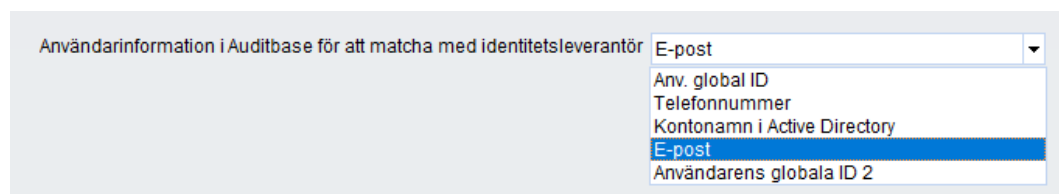


Administratörer måste sedan se till att denna identifierare är ifylld för alla användare som kommer att använda extern autentisering. Identifieraren:

- Får inte vara tom
- Måste vara unik

Om dessa villkor inte uppfyllts kommer användare inte att kunna logga in efter att extern autentisering har aktiverats.


## Konfigurera autentiseringsinställningar

Konfiguration bör göras på skärmen Extern Autentisering i Auditbase Administration. Platsen måste bestämma vilket av de tre autentiseringsalternativen som ska användas.

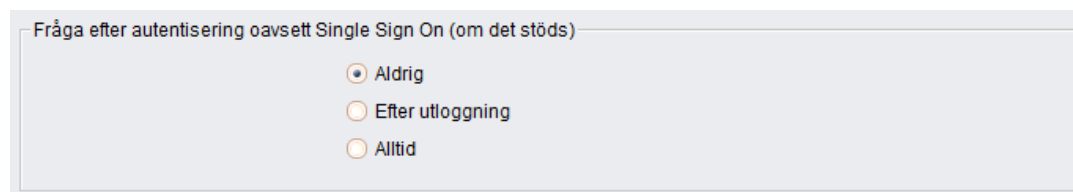


## Aktivera autentiseringsmetoder

Aktivering av extern autentisering görs i Auditbase Administration på skärmen *Autentisering och Lösenordsinställningar*.

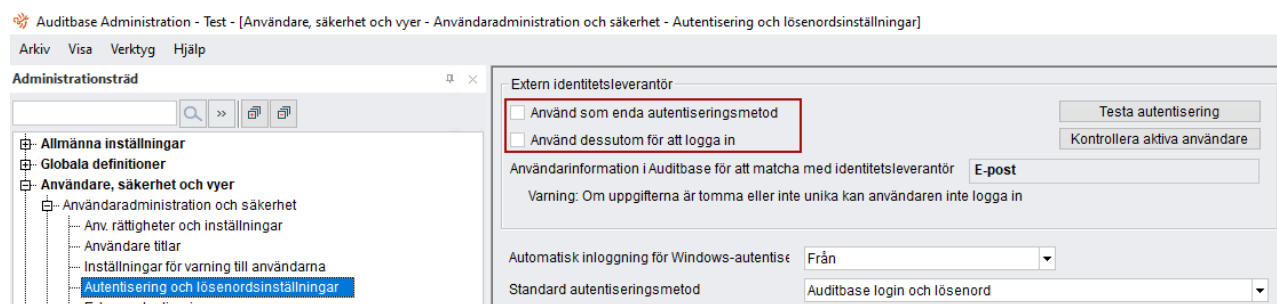

Om de allmänna inställningarna är i läge AV, men extern autentisering behövs för vissa enskilda användare, går detta och görs på skärmen *Anv. rättigheter och inställningar*.

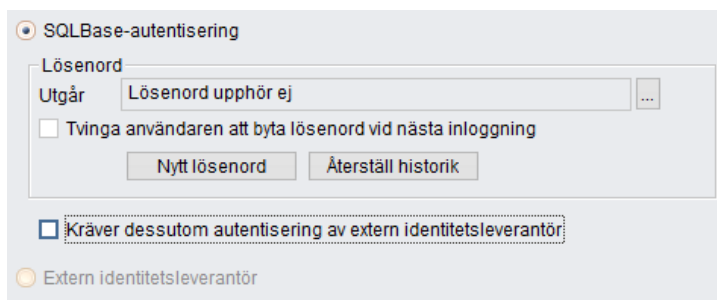


Innan du aktiverar extern autentisering, rekommenderas det att **"Kontrollera Aktiva Användare"** på skärmen *Autentisering och Lösenordsinställningar*. När extern autentisering är aktiverad utför systemet automatiskt "Kontrollera Aktiva Användare".

**OBS:** När du slår PÅ extern autentisering på platsnivå måste den för närvarande inloggade användaren kunna passera den externa autentiseringen. Annars kommer användaren inte att kunna komma in i systemet efteråt för att lösa sina autentiseringsproblem.


Efter det är det nödvändigt att utföra ett autentiseringstest med kontrollen **Testa autentisering**. Under detta test väntar Auditbase på svar från leverantören inom den angivna timeoutperioden.

**OBS:** Autentiseringstest är ett riktigt autentiseringsförsök. Om autentiseringen avbryts kommer administrationsverktyget att vara otillgängligt under denna tid.

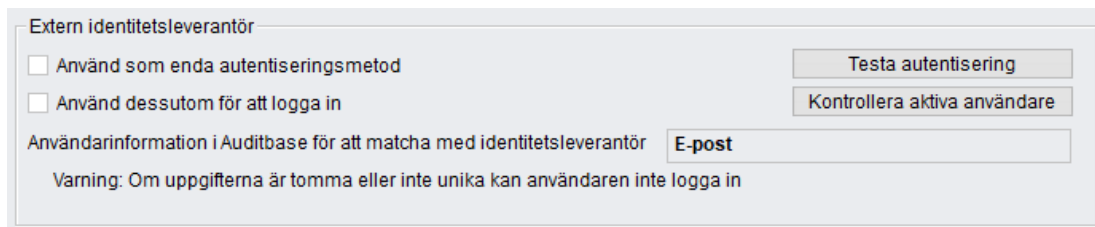


## LYCKAD AUTENTISERING

Om autentiseringen lyckas visas följande meddelande.


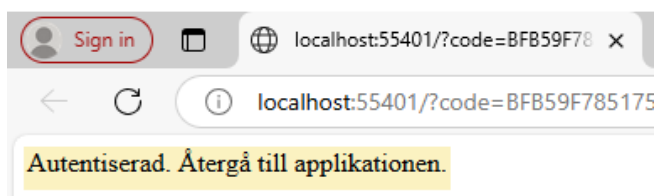


Följande meddelande kommer att visas i Auditbase.

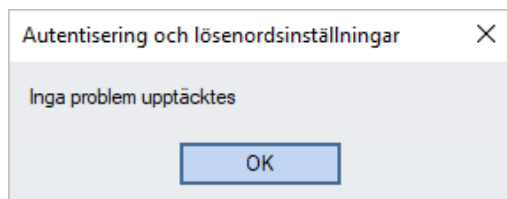

## MISLYCKAD AUTENTISERING

Om användar-ID är tomt eller inte matchar kommer autentiseringsprocessen att misslyckas. Systemet kommer att rapportera misslyckad autentisering:

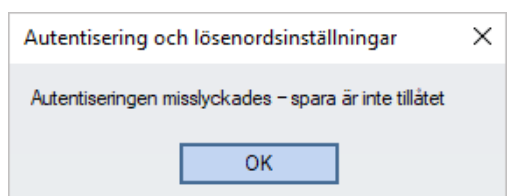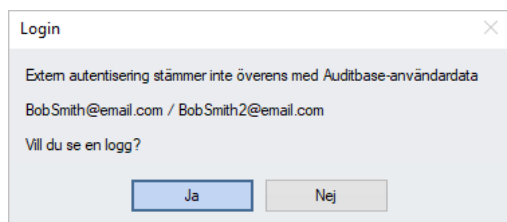

## 7.4 Logga in



Det är viktigt att affärsprocessen säkerställer att utbildning finns på plats för alla användare innan användningen av Auditbase påbörjas.

Det finns två sätt att logga in på Auditbase:

- Med ett Auditbase-konto
- Med ett Microsoft Windows (Active Directory)-konto


Du kan bara använda en typ av konto för att logga in på Auditbase.

För att kunna logga in med ett Microsoft Windows-konto bör systemadministratören ha konfigurerat ditt Auditbase-konto för att använda dina Windows-autentiseringsuppgifter och aktiverat automatisk inloggning för Windows-autentisering.

### 1. Inloggning med ett Microsoft Windows-konto

- Dubbelklicka på Auditbase-ikonen på ditt skrivbord
- Auditbase loggar in dig med dina Windows-autentiseringsuppgifter till standarddatabasen

Om du vill logga in på en annan databas än standarddatabasen, måste du klicka på Windows-ikonen (  ) och gå till **Auditdata> Auditbase med databasval**.

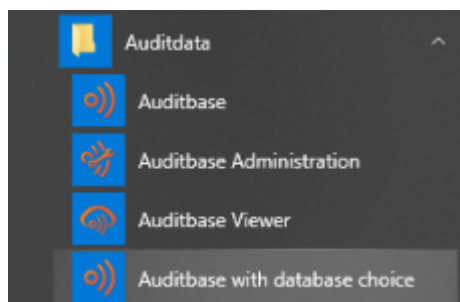

## 2. Inloggning med ett Auditbase-konto

- Dubbelklicka på Auditbase-ikonen på skrivbordet.
- Välj läge DEMO för utbildning, eller XXXX (vanligen ABASE) om det gäller ett verkligt fall.
- Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
- Klicka på **Login**.



**Säkerhet:** Systemet låser ut en användare efter ett antal försök med fel lösenord (konfigurerat, vanligtvis 3). En uppteckning av denna händelse registreras i loggen. Systemadministratören måste då låsa upp användarkontot.

### 2.1. Logga in för första gången

När du loggar in för första gången, eller efter att systemadministratören har ändrat ditt lösenord, visas ett meddelande som kräver att du ändrar ditt lösenord innan du loggar in.

Om en snabbare inloggning krävs kan din Systemadministratör välja att endast ladda standardmodul vid uppstart. Detta innebär att då du öppnar efterföljande moduler kommer detta ta lite längre tid.

Symboler kan sparas på din lokala PC, vilket innebär att inloggning kan bli ytterligare snabbare. Din systemadministratör kan göra en setup för hela siten, men det kan skrivas över för en särskild PC i Arbetsstationens Inställningar i System Administratörsverktyget.

Om Noah inte initierar programmet korrekt då du loggat in, beror det på att datorn har dålig prestanda. När Noah Modulernas navigeringsgenvägar försöker läsa in, eller när Noah ska öppnas kommer en meddelanderuta visas som påtalar problemet. Ett nytt försök att Initialisera Noah kan göras genom att välja **Återinitiera** knappen.

Om Auditbase eller Viewer öppnas direkt från ett annat system, med tillgång till programmet, och lösenordet har ändrats i det systemet men inte i Auditbase, kommer inloggning att misslyckas och en dialogruta med Logga in kommer öppnas.

Du kan få ett meddelande om en licens redan används på den här datorn. Ett meddelande om att det är med ditt användarnamn och att du kan rensa det och ett annat om att det är med någon annans användarnamn och att du bör kontakta systemadministratören.

Inloggningsuppgifter är kopplade till signaturerna, som används för att identifiera vad som har gjorts med en patient, och av vem, i hela databasen. Om **Användarnamn** och **Titelhistorik** ändras på grund av namnbyte eller jobbyte ändras signaturen från datumet framåt från ändringen. Den här informationen gäller alla journal-, dokument-, lager- och patientrelaterade uppgifter som finns i databasen. Den historiska informationen bibehålls för objektens signatur.



Om Single Sign On används och har ställts in för ditt konto, loggar du automatiskt in i Auditbase om du dubbelklickar på ikonen.

*OBS: Systemadministratörens konto med inloggning SYSADM har inte behörighet att logga in till Auditbase. SYSADM-kontot kan användas till att konfigurera användarnas initiala behörigheter. Alla åtgärder med detta konto kommer att loggas som en namngiven användare.*

### 3. Logga in med stark autentisering

Auditbase stöder inloggning med starka autentiseringsmetoder från externa källor, vilket ökar säkerheten och flexibiliteten för användarna.

Stark autentisering kan göras på två sätt:

- **Utöver traditionell AB-autentisering:** Användare kan logga in med stark autentisering tillsammans med traditionella metoder som lösenord eller Active Directory-uppgifter.
- **Istället för traditionell AB-autentisering:** Användare kan välja enbart stark autentisering och kringgå traditionella inloggningsmetoder. VGR-användare föredrar till exempel att inte ha någon inloggningsdialog och IT kan inte garantera unika Windows-inloggningar för alla användare.

Om endast extern autentisering används (Auditbase-autentisering och Windows AD används inte):

Alternativet att ange användar-ID och lösenord är inte tillgängligt och respektive fält är inaktiverade på inloggningsskärmen

Version 6.8.0

**Auditbase**

Systemet är licensierat till  
Auditdata Ukraine (32 användare)

Databas

Användare

Lösenord

Login

CE 0123 | Auditdata A/S  
Widersgade 10B, 1408 Köpenhamn K, Danmark


MD | eIFU Indicator | <https://support.auditdata.com/portalen/kb/articles/instructions-for-use>

**AUDITDATA**  
Copyright © 2025 Auditdata. All rights reserved.



Avbryt

Om endast en databas är konfigurerad och autentisering är inställd utan SQLBase/AD-inloggning, kommer ingen inloggningsskärm att visas och användaren loggas in direkt.

Alternativet att ändra lösenordet är inaktiverat.

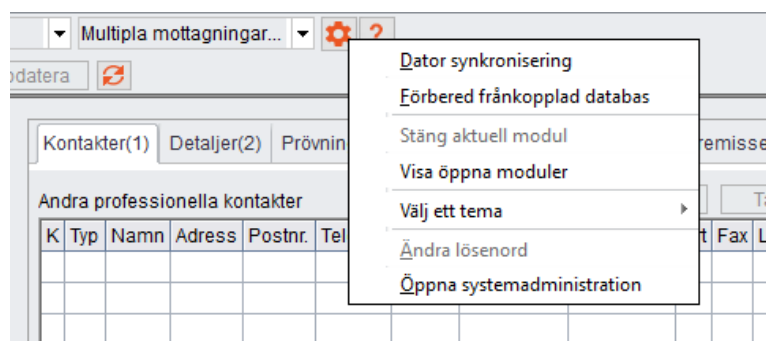

Om användar-ID inte hittas eller ID inte är unikt, visas ett av följande meddelanden.

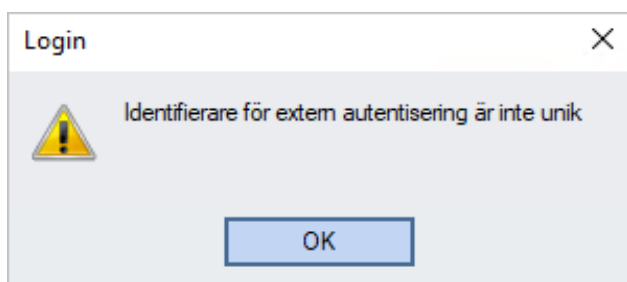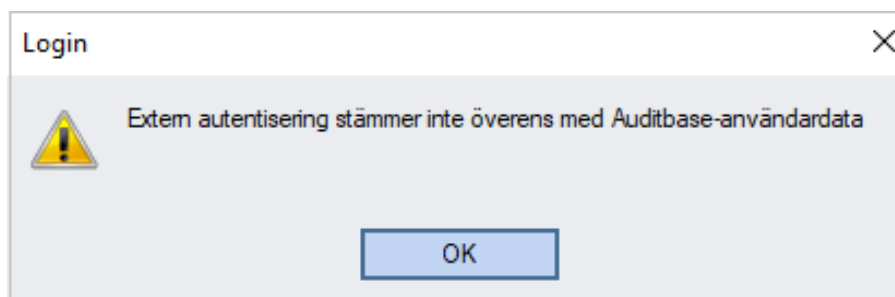

### Att lösa inloggningsproblem med Stark Autentiserin

- **Inga användare kan logga in:** Det här problemet uppstår när alla användare måste passera extern autentisering för att logga in på Auditbase, antingen utöver eller istället för Auditbase-inloggningen. SYSADM-användaren måste logga in på administrationsverktyget, granska och korrigera inställningarna eller stänga av extern autentisering om leverantören inte är tillgänglig.
- **Vissa användare kan inte logga in:** Om bara vissa användare inte kan logga in, kontrollera varje användares externa identifierarvärde, som måste vara unikt och inte

tomt. Systemadministratören bör korrigera det globala ID-värdet eller lösa otillgängligheten för den externa autentiseringsleverantören på användarens dator.

- **Inaktivera stark autentisering:** Om externa autentiseringsproblem inte kan lösas kan den stängas av för enskilda användare på skärmen Användarrättigheter och Inställningar eller för inställningar på platsnivå på skärmen Autentisering och Lösenordsinställningar i Auditbase Administration. Systemet kommer att försöka återställa användarlösenord, men nya lösenord måste skapas om lösenordshistoriken har återställts eller för nya användare som lagts till under tiden för extern autentisering.

## 7.5 Logga ut med F2

Du kan var som helst i Auditbase, men inte i Noah, logga ut snabbt genom att trycka på F2. Systemet uppmanar dig att spara data som du har angett eller redigerat.

När du tryckt på F2 kan du även ändra användare. Detta är praktiskt om du behöver arbeta på en dator där någon annan är inloggad.

Vi har nu förenklat inloggning efter F2-skärmar (till följd av borttagningen av SYSADM). Som systemadministratör kan du logga in som föregående användare efter att användaren har loggat ut. Klicka på **Lås upp** när en användare har loggat ut från Auditbase. Välj sedan alternativet Administratör, ange systemadministratörslösenordet och klicka på **Lås upp** igen. Du är nu inloggad i Auditbase med föregående användares information.

När du stänger Auditbase kommer en bekräftelseruta visas, 'Är du säker på att du vill lämna programmet'. Detta kan också avaktiveras i Auditbase Administration.

## 7.6 Lösenord


Om du anger fel användarnamn eller lösenord fler än tre gånger, avslutas Auditbase.

Det finns också nu möjlighet att utelåsa användaren från Auditbase om ett felaktigt lösenord anges mer än ett visst antal gånger i följd. Antalet tillåtna felaktiga lösenord bestäms av systemadministratören. Om ett korrekt lösenord matas in återställs det felaktiga lösenordet till 0. Om det skulle hända måste användarkontot låsa upp av systemadministratören.


Dessutom kan systemadministratören välja att utelåsa konton som inte har loggats in under en period t.ex. 3 månader. Om så är fallet, kontakta systemadministratören för att låsa upp kontot. Om du klickar på **Lämna** stängs inloggningsfönstret och systemet återgår till Windows. Systemadministratören sköter hanteringen av användarnamn, lösenord och giltighetstid för lösenord.

### 7.6.1 Ändra lösenord

En användare kan ändra lösenord i Auditbase via **Systeminställningar -> Ändra lösenord**

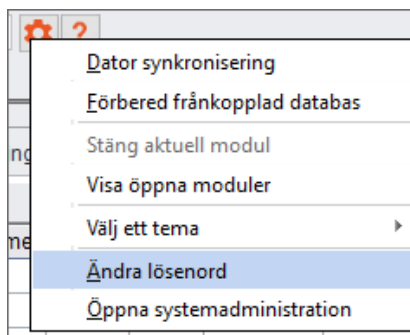

Lösenordet för SYSADM-kontot kan ändras från Auditbase Administration med hjälp av menyalternativet Arkiv -> Ändra lösenord:

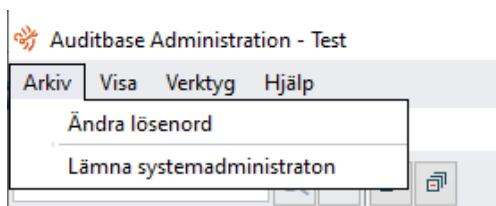

I den öppnade dialogrutan behöver användaren ange sitt nuvarande lösenord, det nya lösenordet och upprepa det nya lösenordet:

### Giltighetstid för lösenord

När det är mindre än fem dagar kvar av ett lösenords giltighetstid (räknat från den senaste ändringen av lösenordet), tillfrågas användaren om han eller hon vill ändra lösenordet nu eller logga in utan att ändra lösenord.

Om ett lösenord har slutat gälla, måste användaren ändra lösenordet för att kunna logga in på Auditbase. Det går inte att få åtkomst till Auditbase utan att ändra lösenordet. Kontakta systemadministratören när du vill ändra ditt lösenord.

### Format för nya lösenord

- Lösenord måste användas och får innehålla högst åtta tecken
- Du måste ange det gamla lösenordet för att kunna ändra till ett nytt
- Lösenordet får endast innehålla bokstäver från A till Z och siffror från 0 till 9
- Det första tecknet måste vara en bokstav från A till Z
- Det är inte säkert att det går att använda ett gammalt lösenord – hur länge historik över tidigare lösenord sparas bestäms av systeminställningarna
- Om du anger fel lösenord tre gånger i rad, stängs fönstret **Ändra lösenord**.



**WARNING:** För att minimera risken att obehöriga får tillgång till systemet, försäkra dig om att ditt lösenord är tillräckligt säkert. Det ska vara tillräckligt långt, komplext och oförutsägbart. Lämna **ALDRIG** ut ditt lösenord.

### Borttappade eller glömda lösenord

Om du har glömt ditt lösenord måste du omedelbart kontakta din systemadministratör för att ändra det. Om du tror att du har blivit av med en notis om det och någon annan kan ha hittat den måste du omedelbart informera systemadministratören.

### Stark Autentisering

Stark autentisering kan nu användas som komplettering till användandet av ett Auditbase lösenord. När detta aktiveras i Auditbase administration kommer användaren behöva vara inloggad i Windows med den starka autentiseringsmetod som är inställd av systemadministratören. I annat fall kommer de inte att få tillgång till Auditbase. Stark autentisering kan innebära att man använder ett Windows smart card, biometrisk enhet eller annan metod för att logga in i Windows.

Genom att logga in i Windows på ett korrekt sätt kommer användaren att kunna logga in i Auditbase.

## 7.7 Automatisk utloggning (Skärmläckare)

Auditbase kan loggas ut tillfälligt manuellt eller kommer loggas ut automatiskt efter en vald tidsinställning för att försäkra att obehöriga inte har tillgång till känslig information i systemet. Skärmläckningsalternativ kan ställas in som en regel för samtliga, site övergripande regler, eller per arbetsstation/dator. Site övergripande regler ställs in av Systemadministratören och arbetsstationsspecifika inställningar kan justeras av användare med utökade rättigheter. Av säkerhetsskäl bör skärmläckaren användas varje gång arbetsstationen lämnas oövervakad. När skärmläckaren är aktiverad är Auditbase låst av den senast inloggade användaren.

- Aktivera skärmläckaren manuellt genom att trycka på **F2**.
- Om du vill använda automatisk aktivering anges detta i administrationsverktyget.

- I administrationsverktyget, kan du välja om skärmläckarens automatiska aktiveringsfunktion ska vara **Aktiverad** eller **Avaktiverad**, och efter hur många minuter skärmläckaren ska aktiveras.
- När skärmläckaren aktiveras, och inga ändringar har gjorts, visas fönstret Login med följande alternativ:
  1. Lås upp
  2. Logga in
  3. Avsluta

### Lås upp

- När du klickar på **Lås upp** återställs låsta anslutningen till databasen (låses upp) och du ska då välja något av följande alternativ i fönstret **Låst program** för att kunna fortsätta:
- **Ändra användare**  
En annan användare kan logga in i Auditbase. Ett varningsmeddelande om att den nuvarande användarens osparade data kommer att försvinna visas.

### Logga in

#### 1. Inloggning med ett Microsoft Windows-konto

- Dubbelklicka på Auditbase-ikonen på skrivbordet
- På skärmen som visas klickar du på Logga in för Auditbase för att logga in dig i standarddatabasen med dina Windows-autentiseringsuppgifter

#### 2. Inloggning med ett Auditbase-konto

- Ange namn och lösenord för den användare som var inloggad då skärmläckaren aktiverades. Auditbase startar med samma status som det hade innan skärmläckaren aktiverades.  
Om du anger användarnamn och lösenord för en annan användare än den som var inloggad när skärmläckaren aktiverades, öppnar Auditbase en ny session utan att någon information från den tidigare sessionen visas på skärmen.

### Avsluta

- Ett varningsmeddelande om att den nuvarande användarens osparade data kommer att försvinna visas och Auditbase avslutas.
- Efter korrekt inloggning aktiveras Auditbase och samma fönster/skärm som visades när skärmläckaren aktiverades visas åter.


*Obs! Skärmläckaren kan inte aktiveras när Noah körs.*

## 7.8 Ändra temat för användargränssnittet (UI)

När du startar Auditbase i det nya temat kan du alltid återgå till det gamla temat om du behöver.

Så här ändrar du temat:

1. Klicka på Redigerings-ikonen (kugghjulet) i **verktygsfältet System**
2. Gå till **Aktuellt standardtema**
3. Välj **Auditbase 5**

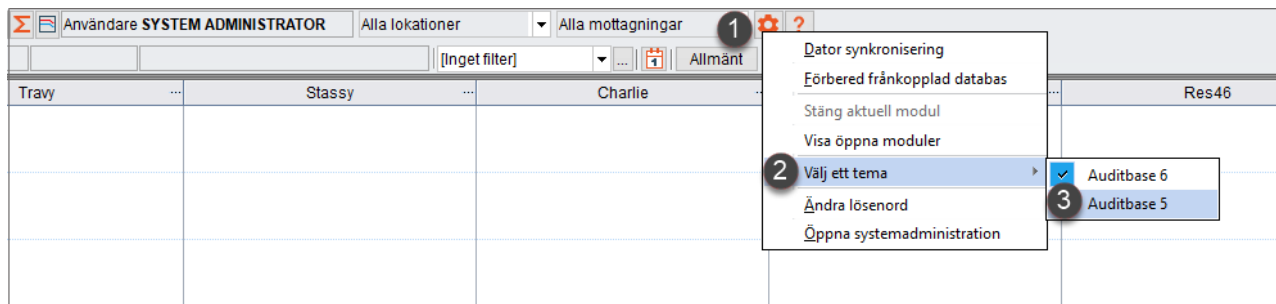


Du bör dock observera när du tillämpar *Auditbase 5 tema* efter att ha ändrat temat:

- Endast UI färgpaletten kommer att ändras, ikonerna kommer inte att återställas
- Innan Auditbase startas om kommer vissa skärmar att ha inkonsekvent färgpalett

## 7.9 Moduler

Auditbase System 4 består av ett antal moduler, avsedda för olika kliniska och administrativa arbetsuppgifter, till exempel tidbokning, lagerinventering och journalföring.

Du kommer åt modulerna via **Navigering**.

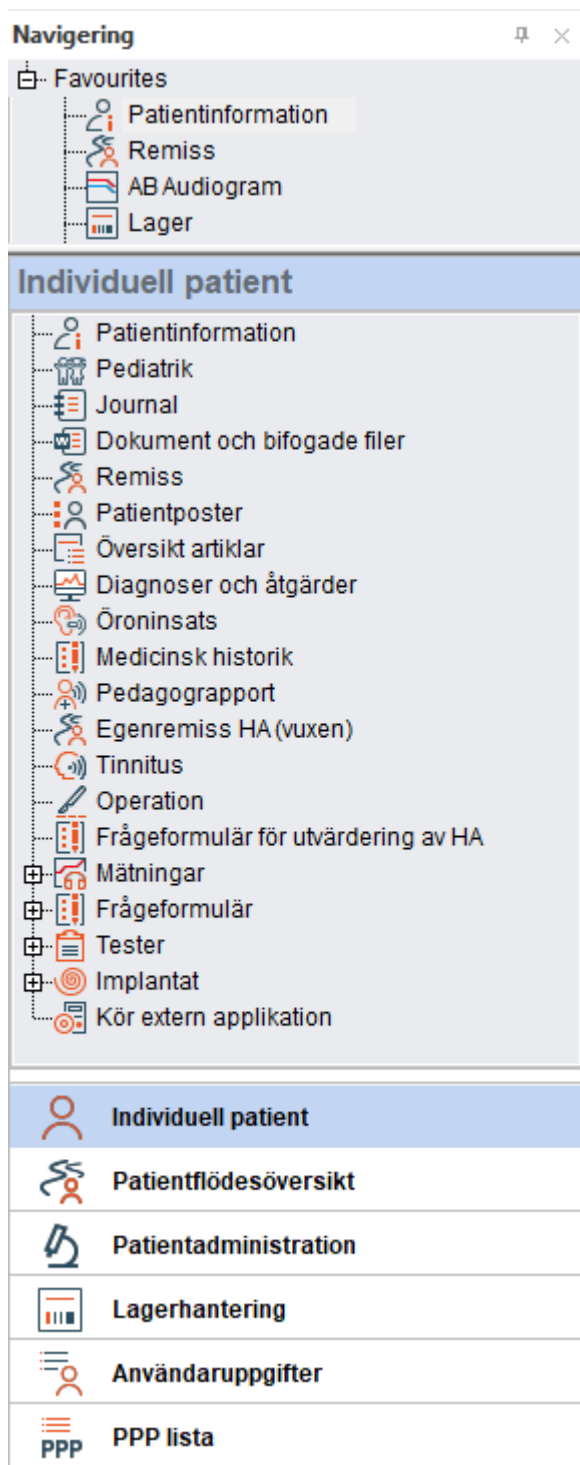

## 7.10 Installation av Noah-moduler

Denna menypost leder till installationsfunktionen för Noah-moduler. Menyposten är endast åtkomlig för personer med administrationsbehörighet.

Ett fönster som visar installerade moduler öppnas. När du vill installera en ny modul väljer du Installera och följer anvisningarna.



När en mätningsmodul har installerats visas den på menyn Mätningar.

Om Noah inte initierar programmet korrekt då du loggat in, beror det på att datorn har dålig prestanda. När Noah Modulernas navigeringsgenvägar försöker läsa in, eller när Noah ska öppnas kommer en meddelanderuta visas som påtalar problemet. Ett nytt försök att Initialisera Noah kan göras genom att välja **Reparera** knappen.

## 7.11 Sortera och spara listskärmbilder

I alla skärmbilder med tabellistor kan du sortera listan efter en kolumn genom att klicka på den kolumn du vill sortera efter.

- När du placerar markören över kolumnrubriken visas meddelandet **Klicka för att sortera kolumn.**

| VLG datum  | Namn                       | Person nr. | Aktiv längd | Avslutningsorsak      | Tidsåtgärd | Latest appt date | Senaste föregående bokning   |
|------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------------|
| 25/09/2018 | EDIT LASTNAME56            | T156-      | 68v 3d      |                       |            |                  | 14/03/2019, ADMINISTRATION   |
| 24/09/2018 | DAGMAR LASTNAME91          | T191-      | 68v 4d      |                       | Räknar     | 25/09/2018       | 25/09/2018, BOKAD E, LUDVIKA |
| 01/10/1997 | FIRSTNAME297 LASTNAME297   | T1297-     | 1163v 2d    | 100a, Referral closed | Stängd     |                  |                              |
| 22/09/1998 | HUGO LASTNAME668           | T1668-     | 1112v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |                  |                              |
| 22/04/1997 | RAGNHILD LASTNAME749       | T1749-     | 1186v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |                  |                              |
| 10/06/2004 | FIRSTNAME1107 LASTNAME1107 | T11107-    | 814v 1d     | 100a, Referral closed | Stängd     |                  |                              |
| 22/03/1996 | EVA LASTNAME1291           | T11291-    | 1243v 0d    | 100a, Referral closed | Stängd     |                  |                              |

- Klicka en gång för att sortera kolumnen i stigande och en gång till för att sortera den i fallande ordning.
- Du kan också högerklicka på kolumnen och välja **Välj sorteringsordning**.

| VLG datum  | Namn                       | Person nr. | Aktiv längd | Avslutningsorsak      | Tidsåtgärd |
|------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
| 25/09/2018 | EDIT LASTNAME56            | T156-      | 68v 3d      |                       | Räknar     |
| 24/09/2018 | DAGMAR LASTNAME91          | T191-      | 68v 4d      |                       | Räknar     |
| 01/10/1997 | FIRSTNAME297 LASTNAME297   | T1297-     |             |                       | Stängd     |
| 22/09/1998 | HUGO LASTNAME668           | T1668-     |             |                       | Stängd     |
| 22/04/1997 | RAGNHILD LASTNAME749       | T1749-     |             |                       | Stängd     |
| 10/06/2004 | FIRSTNAME1107 LASTNAME1107 | T11107-    |             |                       | Stängd     |
| 22/03/1996 | EVA LASTNAME1291           | T11291-    |             |                       | Stängd     |
| 23/10/1997 | FIRSTNAME1387 LASTNAME1387 | T11387-    |             |                       | Stängd     |
| 28/01/1997 | FIRSTNAME1451 LASTNAME1451 | T11451-    |             |                       | Stängd     |
| 25/08/1997 | OLGA LASTNAME1490          | T11490-    | 1168v 4d    | 100a, Referral closed | Stängd     |

- I den här dialogrutan kan du ändra standardsorteringsordningen med upp till tre kolumner.

Sortera

Sortera på

VLG datum

☒ Stigande  
☐ Fallande

Därefter på

Namn

☒ Stigande  
☐ Fallande

Därefter på

Aktiv längd

☒ Stigande  
☐ Fallande

OK

Avbryt

- Du kan byta plats på kolumnerna i tabellen för att få en annan vy.
- När du placerar markören i nederkanten på kolumnrubriklistan visas en symbol.

| Förlopps ID | VLG datum  | Namn                       | Person nr. | Aktiv längd | Avslutningsorsak      | Tidsåtgärd |
|-------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
|             | 25/09/2018 | EDIT LASTNAME56            | T156-      | 68v 3d      |                       | Räknar     |
|             | 24/09/2018 | DAGMAR LASTNAME91          | T191-      | 68v 4d      |                       | Räknar     |
|             | 01/10/1997 | FIRSTNAME297 LASTNAME297   | T1297-     | 1163v 2d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 22/09/1998 | HUGO LASTNAME668           | T1668-     | 1112v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 22/04/1997 | RAGNHILD LASTNAME749       | T1749-     | 1186v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 10/06/2004 | FIRSTNAME1107 LASTNAME1107 | T11107-    | 814v 1d     | 100a, Referral closed | Stängd     |

- När symbolen visas kan du dra och släppa kolumnen till en annan plats i tabellen.

| Förlopps ID | VLG datum  |  | Namn                       | Person nr. | Aktiv längd | Avslutningsorsak      | Tidsåtgärd |
|-------------|------------|--|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
|             | 25/09/2018 |  | EDIT LASTNAME56            | T156-      | 68v 3d      |                       | Räknar     |
|             | 24/09/2018 |  | DAGMAR LASTNAME91          | T191-      | 68v 4d      |                       | Räknar     |
|             | 01/10/1997 |  | FIRSTNAME297 LASTNAME297   | T1297-     | 1163v 2d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 22/09/1998 |  | HUGO LASTNAME668           | T1668-     | 1112v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 22/04/1997 |  | RAGNHILD LASTNAME749       | T1749-     | 1186v 3d    | 100a, Referral closed | Stängd     |
|             | 10/06/2004 |  | FIRSTNAME1107 LASTNAME1107 | T11107-    | 814v 1d     | 100a, Referral closed | Stängd     |

Du kan även ändra kolumnbredden genom att placera markören över skiljelinjen mellan två kolumnrubrikutor, och klicka och dra för att göra rutan större eller mindre. Det är rutan till vänster som påverkas av ändringarna.

När du har ställt in tabellvisningen som du vill ha den kan du spara den som standardvy.

- Högerklicka på tabellen och välj **Spara användarbild**.

| VLG datum  | Namn               | Person nr. | Aktiv längd | Avslutningsorsak      | Tidsåtgärd |
|------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
| 25/09/2018 | EDIT LASTNAME56    | T156-      | 68v 3d      |                       | Räknar     |
| 24/09/2018 | DAGMAR LASTNAME91  | T191-      | 68v 4d      |                       | Räknar     |
| 01/10/1997 | FIRSTNAME297 LASTN |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 22/09/1998 | HUGO LASTNAME668   |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 22/04/1997 | RAGNHILD LASTNAME  |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 10/06/2004 | FIRSTNAME1107 LAST |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 22/03/1996 | EVA LASTNAME1291   |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 23/10/1997 | FIRSTNAME1387 LAST |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 28/01/1997 | FIRSTNAME1451 LAST |            |             | a, Referral closed    | Stängd     |
| 25/08/1997 | OLGA LASTNAME1490  | T11490-    | 1168v 4d    | 100a, Referral closed | Stängd     |

- Om du har administratörsbehörighet kan du även spara en standardvy för platsen här.

För vissa moduler i applikationen, som Journal, Patientinformation och Bokning, kan du ställa in visningen. Dessa inställningar sparas genom att du väljer Spara fönsterinställning i menyn Visa. Se beskrivningarna för dessa moduler för mer information.

## 7.12 Sortera kolumner och göra textsökning

I de flesta fönster kan du sortera tabeller utifrån kolumn och göra textsökningar inom den sorterade kolumnen. När du pekar på kolumnrubriken visas en knappbeskrivning om det går att sortera kolumner och göra textsökningar i tabellen.

Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera tabellen.

När du väljer en valfri rad i tabellen, görs en sökning efter en matchande rad för varje tangent du trycker på. I de flesta fall visas söksträngen i statusfältet i Auditbase-systemets huvudfönster. Om du vill gå till nästa rad som matchar sökkriteriet trycker du på **Ctrl+Return**. Om du vill ta bort söksträngen trycker du på Backsteg.

Det går att rulla upp och ned i alla tabeller med mushjulet.


## 7.13 Verktögsfält och startfönster

All of the icons on the menus have a text label or a tooltip to make it clear what the icon represents.

Systemets verktögsfält innehåller följande:

- En knapp för att öppna och stänga Navigeringsfönstret. Knappen lyser orange vid öppet och är grå då det är stängt .
- Den valda patientens födelsedata eller kod. Detta definieras av din systemadministratör.
- Den valda patientens namn.
- En rullgardinslist  för att välja senaste patienter.
- En knapp för att byta till **Patientinformation** .
- En knapp för att skapa en patients behandlingssammanfattning och visa denna .

- En knapp för att visa patientens senaste audiogram .
- Namnet på inloggad användare.
- Den nuvarande lokationen kan också väljas från rullgardinslisten.

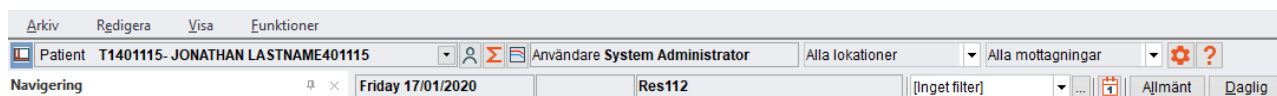

- Under denna linje visas aktiv datum, tid och resurs.
- **Klinikfilter** och **Klinikfilterinställningen** visas även.

Den modul som ska vara aktiv då du loggar in i Auditbase definieras som standard av dig som användare. Kontakta din systemadministratör för att få veta hur du gör detta.


Bandet överst på sidan kommer visa ikoner inom den modulen som du använder för tillfället. De tillgängliga ikonerna och deras funktioner kommer variera beroende på vilken modul du har valt. Alla band kommer ha ikoner grupperade i flikarna Arkiv, Redigera, Funktioner och Visa.

Bandet kan visas eller stängas. Dubbelklicka på det valda bandet för att stänga det. Dubbelklicka igen för att öppna.

Bandet kan också stängas eller öppnas automatiskt. Först, dubbelklicka på bandet som om du ska stänga det, en enkelclickning kommer sedan tillfälligt öppna bandet för att klicka på en ikon eller varsomhelst på skärmen för att stänga bandet igen. Detta maximerar skärmfönstret medan du fortfarande har tillgång till bandets funktioner.

Lokation och Mottagning kan användas för att filtrera med en Lokationsfilteringslicens; detta är en valbar funktion i Auditbase.

Du kan göra ett enkelt val, välja en grupp skapad av din Systemadministratör eller skapa dina egna flerval. Ett flerval skapas genom att välja lämpliga alternativ från Lokationen eller Mottagningens rullista. Ett fönster öppnas där du kan göra dina val genom att kryssa i de kryssrutor som tillhör rätt lokation eller mottagning.

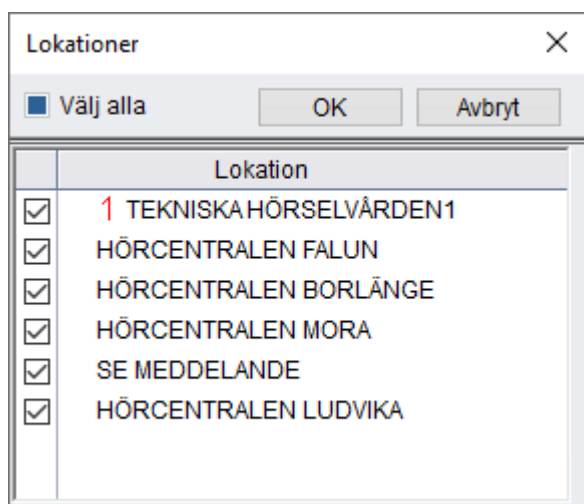

När du gjort ditt val, tryck OK och fönstret kommer stängas eller Avbryt för att avbryta utan att spara dina ändringar.

Om ett flerval är utfört kan Lokation eller mottagningsfilter visa Flera lokationer. Dessa val kan ses genom att du placerar musmarkören över filtret och läsa verktygstipset. Dessa val sparas inte, så om de används ofta rekommenderas att Lokationsgrupp då de är listade för enkel användning.


## 7.14 Navigerings Rutor

Navigeringsrutan till vänster på skärmen innehåller genvägar till alla Moduler, Mätningar, Frågeformulär och Tester. Dessa grupperas i rutor som passar deras funktionalitet. De tillgängliga rutorna visas längst ner i Navigeringsområdet. Dessa rutor skiljer sig från standardvyn som är vald av din systemadministratör- De som visas nedan är standard i Auditbase 5 grupperingen.

- Individuell Patient
- Patientflödesvy
- Patientadministration
- Lagerhantering
- Användaruppgifter
- PPP-listor

Storleken på området för **Navigering** kan ändras. Dra i områdesavdelaren mot höger eller vänster från den högra gränskanten. Klicka och dra med musen för att förändra visningsrutorna.

Välj en ruta som passar dina behov och den kommer öppna och visa sina genvägar ovanför. Välj en genväg från listan och den kommer öppnas till höger om **Navigering**.

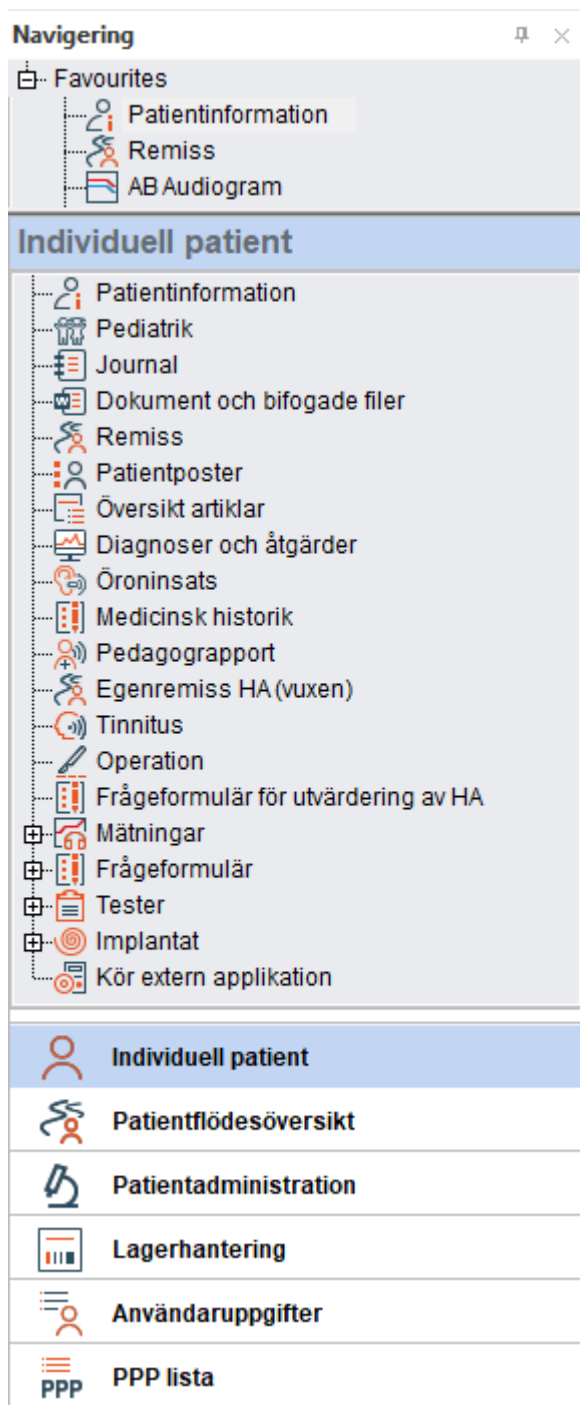


## 7.15 Användarfavoriter

Från de tillgängliga Modulerna, Mätningar, Frågeformulär och Test, välj genvägar från den ruta som passar dig och skapa en lista med Favoriter.

Gå till Navigering; Välj en **Navigeringsruta** -> **högerklicka** en genväg -> klicka **Visa i Favoriter**.

Den valda genvägen kommer kopieras till din lista med favoriter överst i området **Navigering**.

Din lista med favoriter kommer alltid visas överst i **Navigering**.

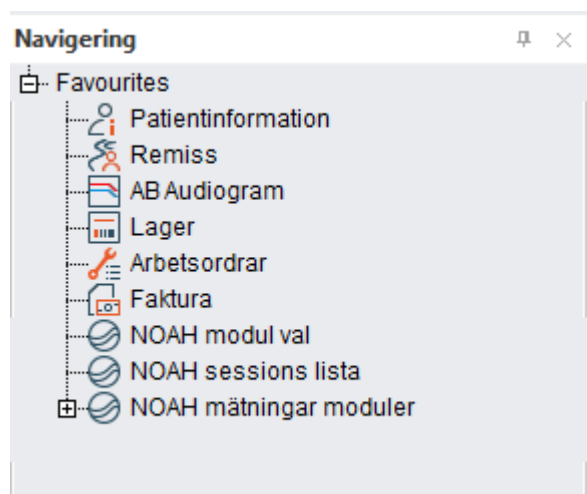

Flytta musen till delaren underst i området Favoriter till dess att muspekaren ändrar sig enligt bilden ovan, nu kan du utöka rutan för att se hela innehållet. Både dina favoriter och storleken på rutan kommer att sparas då du loggar ut från Auditbase.

Högerklicka på en genväg och välj **Ta bort från favoriter** för att radera den från din lista över favoriter.

För att ordningen dina favoriter presenteras, högerklicka på en genväg och använd **Flytta upp** eller **Flytta ner** och ge den en ny placering.

## 7.16 Öppna, stäng och autodölj Navigeringsområdet

 Klicka på ikonen till vänster om patientens namn och **Navigering** kommer stängas. Klicka på samma ikon igen för att öppna Navigeringsområdet igen. När det är öppet kommer ikonen vara orange.

 När den är stängd kommer ikonen vara grå. Genom att stänga **Navigering** kan skärmen utnyttjas maximalt.

**Navigering** kan döljas, vilket gör att skärmen kan utnyttjas maximalt medan det fortfarande är enkelt att komma åt **Navigering**.

 Klicka på ikonen med en nål överst till höger i Navigeringsrutan, nålen visas alltid horisontellt. Dölj är nu aktiverat, flytta muspekaren och Navigeringsrutan kommer gömma sig själv.

Dra muspelaren tillbaka till **Navigering** sområdet, stanna till över ordet **Navigering**. Området visas nu igen.

När området inte är dolt, kan du välja genvägar från Navigeringsområdet genom att föra muspekaren över det och göra ditt val.

**När du använder autodöljfunktionen kommer ikonerna för öppna och stäng vara inaktiva. Du behöver använda nålikonen för att öppna rutan permanent innan dessa ikoner blir aktiva igen.**

Låt Navigeringsrutan vara öppen igen genom att klicka på nålikonen överst i Navigeringsområdet. Nu visas nålen vertikalt

▢ När Navigeringsområdets öppna/stäng symbol är iklickad och Navigering autodölj används, kommer ett varningsmeddelande visas. För att förhindra att varningen visas för framtida tillfällen, markera Visa inte detta meddelade igen-rutan.


Du kan återställa alla meddelanden för att visas igen i System Administrationen ->Användarinställningar ->Användarspecifika alternativ -> Återställ alla kryssrutor 'Visa inte detta meddelande igen' för att visa igen.

Stäng **Navigering** permanent genom att klicka på ✕ överst till höger i området. Öppna rutan genom att klicka på ikonerna till vänster om patientens namn.

## 7.17 Rutor Konfiguration


Rutorna i Navigeringsområdet kan konfigureras för att passa alla individuella behov. Längst ner i området, till höger om den sista rutan, finns en liten nedåtppekande pil ▾. Klicka på denna för att öppna alternativ för konfigurering av rutorna.

Välja **Visa färre knappar** kommer minimera den sista rutans titel till endast en ikon längst ner. Välj **Visa färre knappar** igen för att minimera nästa, sista rutans titel. Klicka på **Visa fler knappar** kommer återställa dem till hela rubriker.

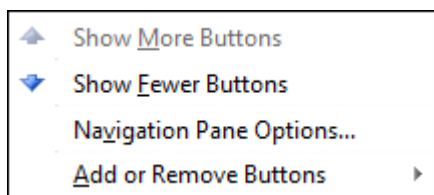


Håll muspekaren över Lägg till eller Ta bort Knappar och en sekundär meny kommer öppnas. Från denna meny kan du ta bort rubriker från listan helt. Ersätt den borttagna rubriken närsomhelst genom att välja dem igen i samma meny.



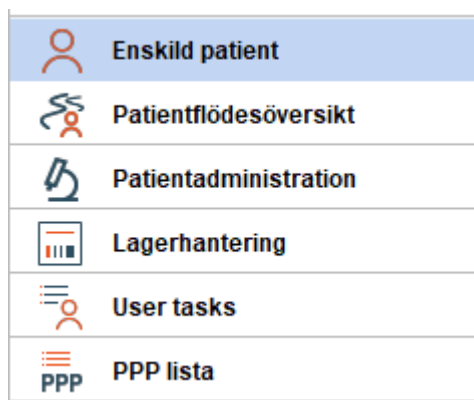

Genom att välja **Navigering Rutor Alternativ** i menyn får du möjlighet att ändra ordningen som rubrikerna presenteras, liksom ta bort och lägga till rubriker till listan.

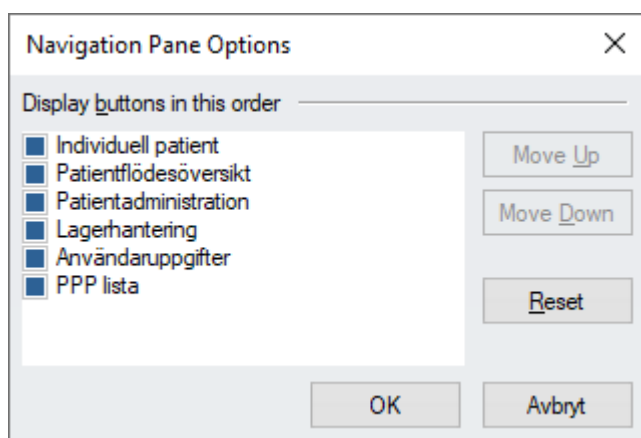

Val som görs här är unika för varje användare och kommer sparas i Auditbase då du loggar ut.

## 7.18 Utskrift och omdirigering av filstyrning

I Auditbase går det att skapa standardinställningar för olika typer av utskrifter. Användarna kan välja en av dessa inställningar som standard på sin egen dator och på så sätt kontrollera hur utskrifterna görs.

Systemadministratören kan konfigurera omdirigeringen av filstyrning för alla systemutskrifter i Auditbase. Det går att välja ett omdirigeringsalternativ för varje enskild rapport, vilket betyder att olika rapporter kan ha olika inställningar.

Följande alternativ är tillgängliga:

- Skicka utskriften till programmets standardskrivare (ingen omdirigering)
- Skicka utskriften till standardskrivaren i Windows
- Visa Windows-dialogrutan **Skriv ut** före utskrift. I denna dialogruta kan du välja skrivare och ange antal kopior
- Skicka utskriften till en fil

- Skicka utskriften till en fil och bifoga den i ett nytt e-postmeddelande. För vissa rapporter som har den här inställningen, kan man välja att systemet ska kopiera in mottagarens e-postadress om e-postadressen finns i systemet.


*Obs!*

*För att kunna skicka en utskrift till en fil och bifoga den i ett e-postmeddelande måste tilläggsmodulen Utskrift/Filstyrning vara licensierad. Microsoft Office måste vara installerat på användarens dator och skrivaren Microsoft Office Document Image Writer måste vara tillgänglig.*

*Användarrapporter kan inte omdirigeras.*


Inställningarna som beskrivs ovan görs av systemadministratören.

## 7.19 Hjälp

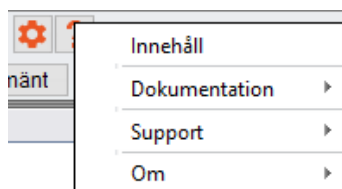


Hjälpmenyn har olika alternativ för hjälpfiler, Innehåll, användarguider eller annan dokumentation och bästa sättet att få tillgång till **Support**.

### 7.19.1 Innehåll

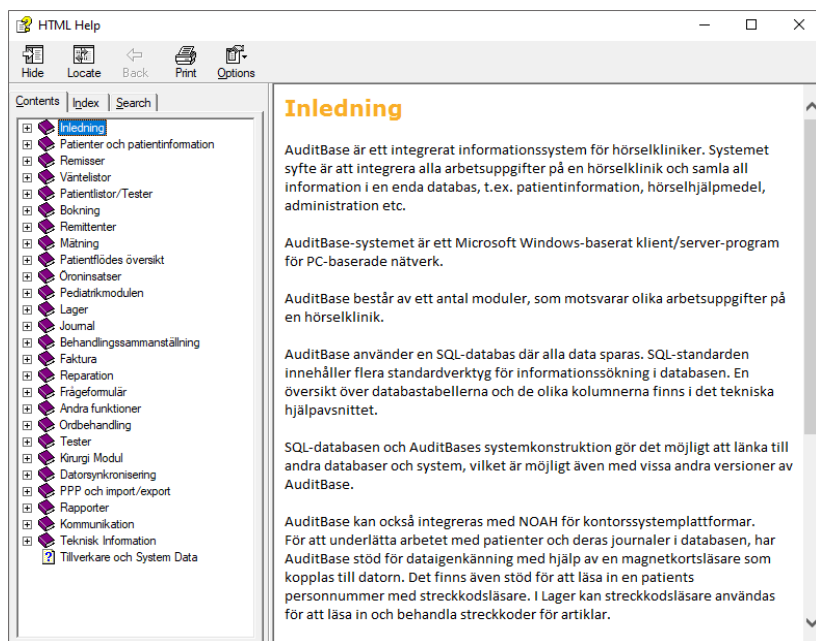


En fullständig innehållsförteckning över hjälpmenyn visas. Du kan söka på olika poster och individuella poster kan expanderas till specifika ämnen. Innehållet speglar användarguiden.

## 7.19.2 Dokumentation

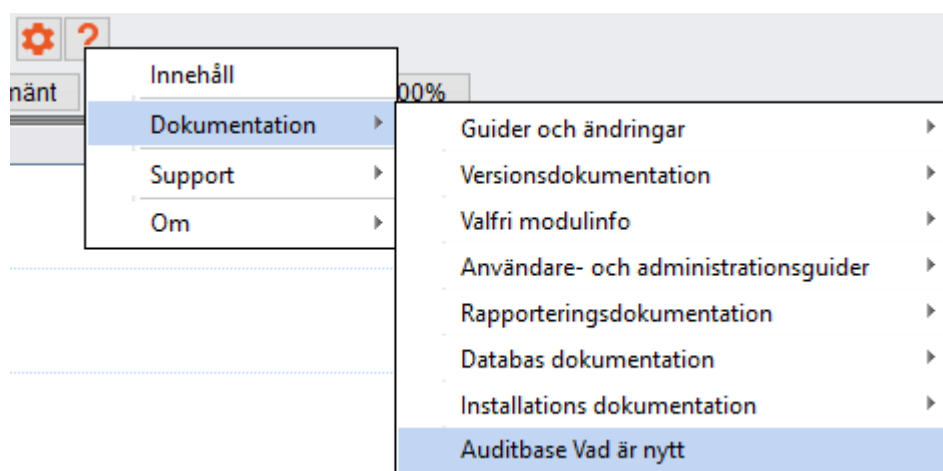

Ett antal dokument kan läsas genom att välja Dokumentation och därefter göra ytterligare val från listan med dokument. Genom att dubbelklicka på det önskade dokumentet kommer det öppnas om en PDF Reader är installerad.

## 7.19.3 Support

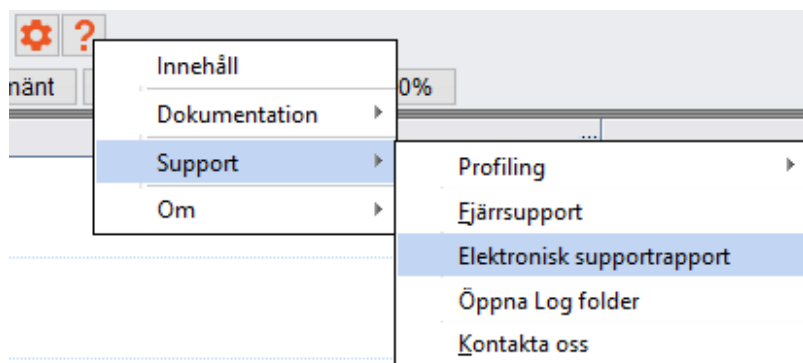


### Profilerings

- Mer information finns i avsnittet om [Profilerings](#).

### Fjärrsupport


- Genom att välja det här alternativet laddas TeamViewers elektroniska supportapplikation ned.

Välj ditt språk på den öppnade webbplatsen.

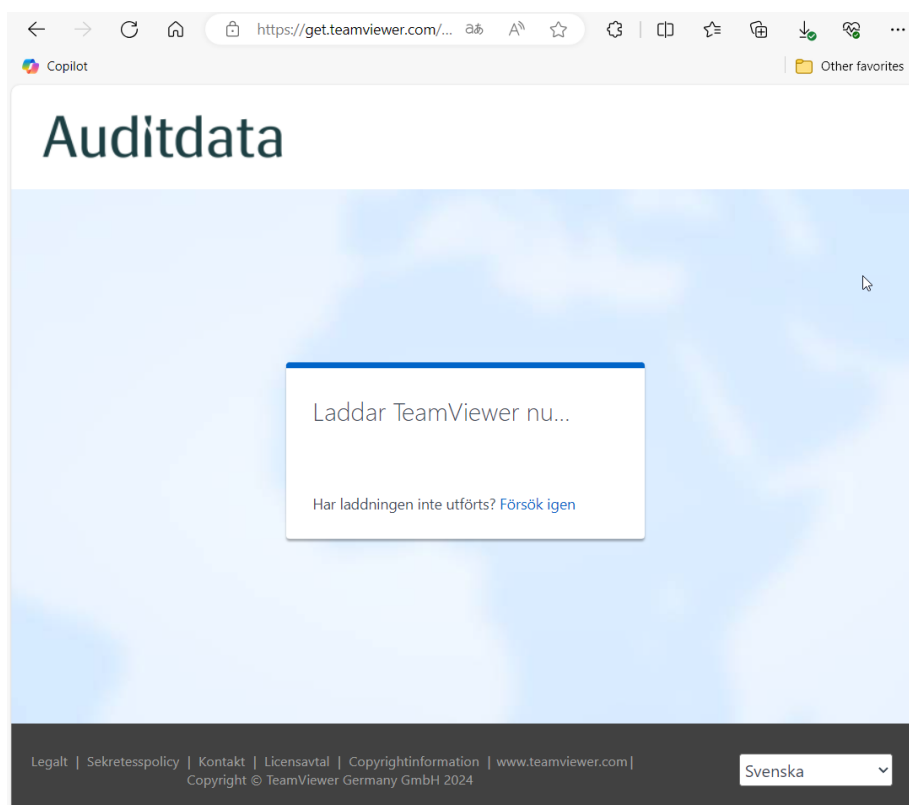


Öppna (starta) TeamViewerQS.exe när den har laddats ner.


Bekräfta att köra den med knappen Kör.

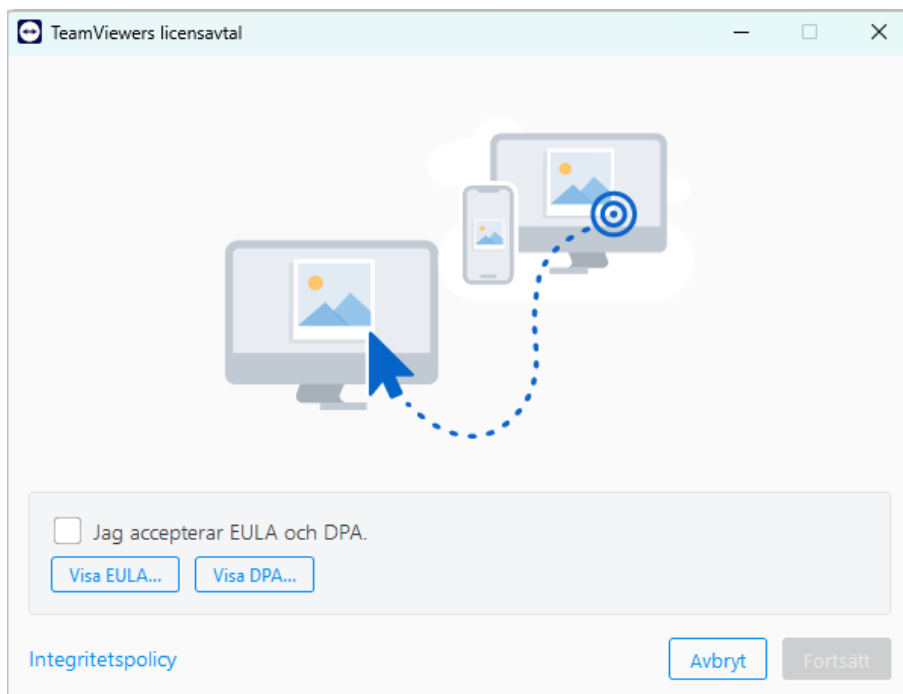

Acceptera licensavtalet.

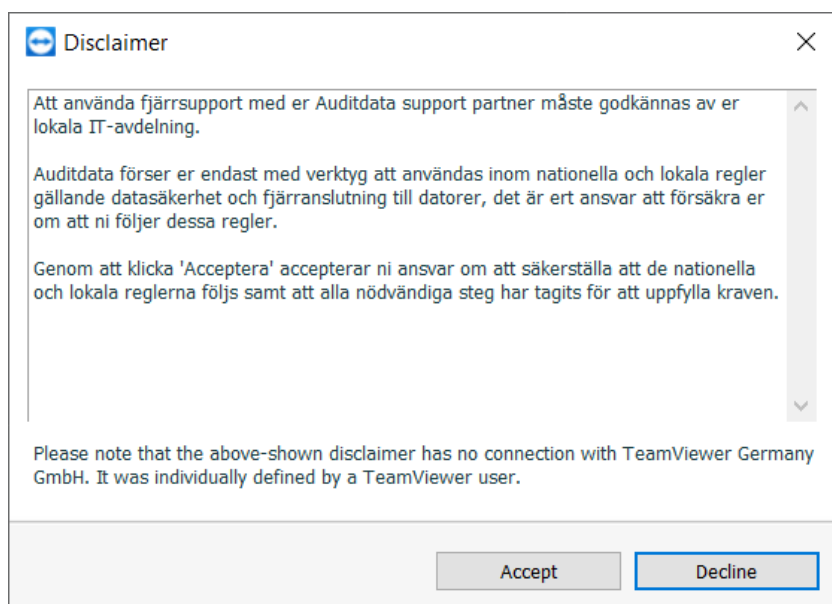


Acceptera friskrivningsklausulen om er IT-avdelning tillåter användning av Teamviewer.

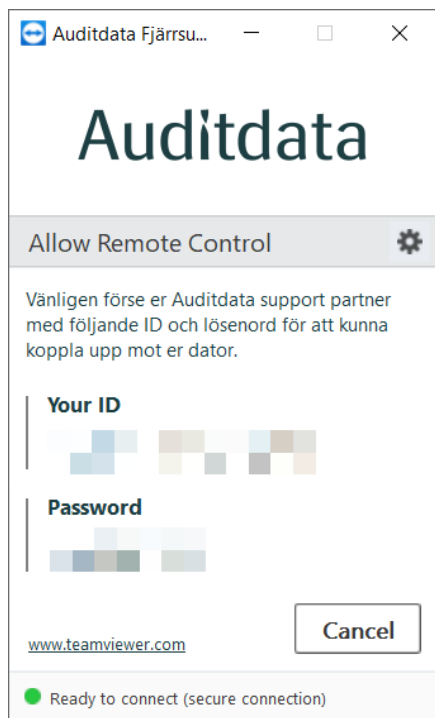


Er Auditdata support kommer efterfråga det ID-nummer och Lösenord som visas.

### Elektronisk support rapport

Genom detta val produceras en elektronisk rapport som kan skickas till Auditdata.

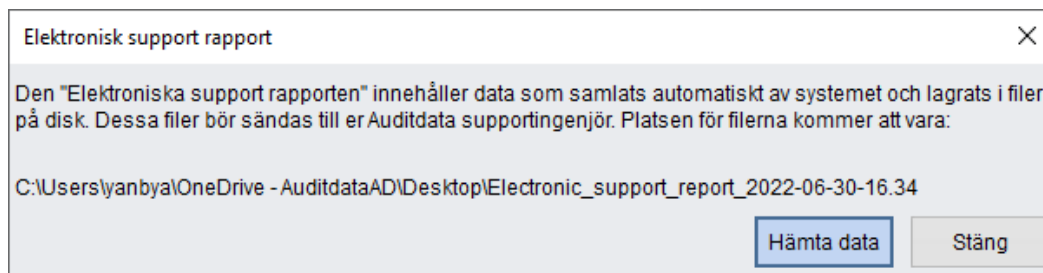

- Notera var filen sparas till, det bör vara på Skrivbordet, tryck därefter **Hämta data**. När informationen hämtats kommer ett bekräftelsemeddelande att visas.

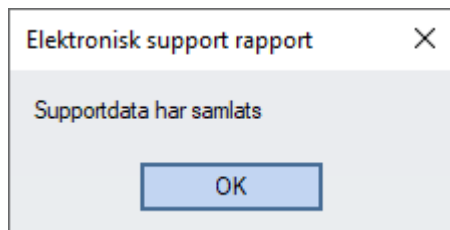

En mapp kommer att skapas på ditt skrivbord, den innehåller två filer. Dessa filer kan skickas med e-post till Auditdata för hjälp med att lösa problem.

### Öppna loggmapp

Valet **Öppna loggmapp** på **Hjälp-menyn** kommer att öppna ett fönster där vissa loggfiler lagras. Du kan bli ombedd av Auditdata support att skicka dessa filer om du har rapporterat ett problem. Inga patientdata finns i dessa loggar.

### Kontakta oss


Kontakta oss kommer att öppna kontaktsidan på Auditdata webbplats.

## 7.19.4 Profilerings

**Profilerings** är ett supportalternativ i Auditbase, så att användarna kan samla in information för utvecklare om hur programmet körs.

Det är praktiskt när du felsöker problem eftersom profilerings loggar all systemaktivitet som senare kan granskas av supportteamet eller utvecklarna. VIKTIGT: ingen patientinformation registreras.


Användare kan komma åt profilerings från **Hjälp-menyn** i verktygsfältet system:

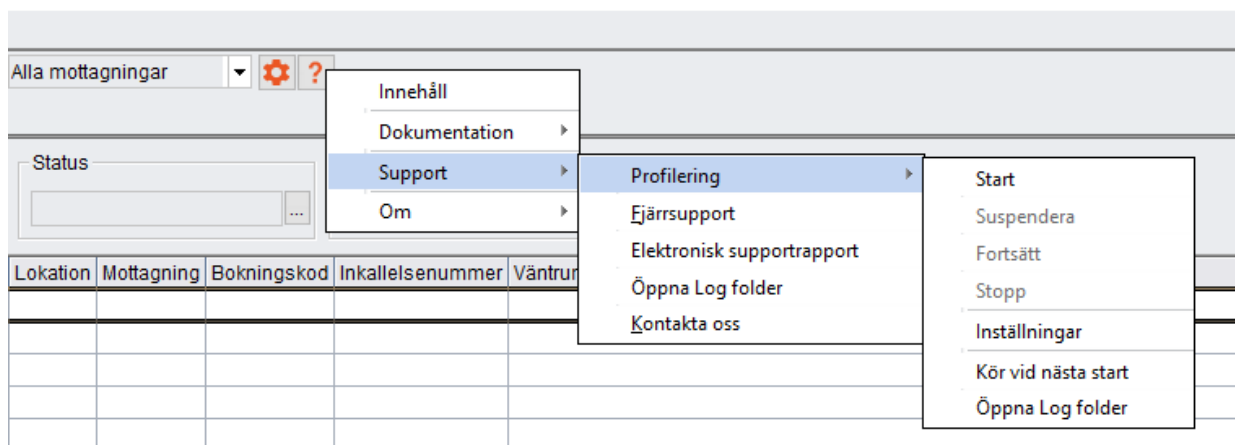

Följande kontroller tillåter hantering av Profileringsfunktionen:

1. *Start*: påbörjar profilering, som potentiellt kan bromsa programmet
2. *Pausa*: avbryter tillfälligt profilering om utför andra uppgifter kräver fullständig systemkapacitet
3. *Fortsätt*: startar om profilering som har pausats
4. *Stopp*: avslutar profileringsläget
5. *Inställningar*: innehåller ytterligare profileringsinställningar
6. *Kör vid start*: påbörjar profilering vid nästa Auditbase start
7. *Öppna loggmapp*: öppnar mappen med profileringsloggar

När profilering är aktiverad visas motsvarande banderoll. Användarna kan få mer information genom att klicka på **info-knappen** eller inaktivera programloggning genom att klicka på **stoppa**.

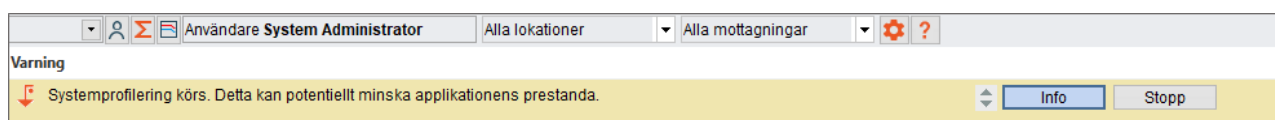

Eftersom aktivering av **Profilering** kan påverka prestandan för programmet, rekommenderas att användare går in i Profileringsläge endast när man instrueras att göra det av Auditdatas supportspecialister.

## Inställningar

Mer avancerade konfigurationsalternativ är tillgängliga från inställningsfönstret. Här kan du konfigurera följande:

1. *Mapp för loggar*: Använd standard eller ange din egen mapp
2. *Nivå*: definiera profilerings nivån. Utökad nivå rekommenderas
3. *Kör vid nästa Auditbase start*: Aktivera start av profilering så snart du startar Auditbase
4. *Stanna vid*: Ange det datum då profilering ska stängas av. Om du dubbelklickar i rutan infogas dagens datum som kan ändras efter behov
5. *Ta automatiskt bort loggfiler* som är äldre än ett angivet antal dagar
6. *Begränsa filstorleken till högst en fördefinierad storlek i MB*

### 7.19.5 Om Noah

Använd detta menyval för specific information på den installerade versionen av Noah Engine. Informationen inkluderar kundens namn, licensnummer, versionsnummer, build nummer och antalet licensierade användare som har tillgång till systemet.

### 7.19.6 Om Auditbase

Använd detta menyval eller tryck F1 för att se specifik information om den aktiva versionen av Auditbase System.

Du kan se versionsnummer, build nummer, kundnamn, licens ID och antalet licensierade användare som har tillgång till systemet.



För ytterligare information, se [Bilaga B.2 Tolkning av etiketttecken](#).

## 7.20 Tillgänglighetsalternativen

### Väntelista



(Tillgänglighetsalternativ) Med alternativet Användare i Admin **Väntelisttyp påverkad av uppdateringsregeln** markerad och **Uppdatera väntelista omedelbart efter ändring av filterkriterier?** Inställd på **Nej**, kan användaren gå igenom väntelistorna och få dem att läsas av en skärmläsare utan att välja dem. För att välja det, tryck på **Enter**. För att öppna rullgardinsmenyn, tryck på **Alt + Nerpil**.

### Bokning - Tidsplan

Aktivera alternativet Användare i Admin **Visa timmar och minuter i varje tidslucka** för att få en skärmläsare att läsa tiden för varje rad.

Med alternativet **Uppdatera inte tidsplanens övre skärm** förrän valet bekräftas i nedre skärm är aktiverat, ändras inte resursen på den övre skärmen förrän **Enter** på namnen på Resursraden i den nedre delen är vald. Detta måste göras innan användaren väljer resursen de vill visa.

För att säkerställa att en skärmläsare kan läsa rätt Resursnamn i nedre tabellen, var noga med att tillåta tillräckligt med tid mellan att välja varje resurs.

(Tillgänglighetsalternativ) Tryck på **Alt + K** för att flytta fokus till kalendern och här kan du flytta mellan datum med piltangenter och **PgUp/ PgDn**-tangenter.

### Patientsökning

Med brugerindstillingen i Admin **Søg patienter: Vis besked med søgeresultater når tabel er udfyldt (Tilgængelighedsoption)** valgt, viser en meddelelsesboks antallet af fundne patienter som skal læses af en skærmlæser, når søgningen er gennemført. Benyt mellemrumstangenten til at ændre valgte markering.

### Överallt

(Tillgänglighetsalternativ) Tryck på **F6** för att ta fram en liten dialog med den valda patientens ID och namn som en skärmläsare kan läsa.

### Patientens uppgifter

(Tillgänglighetsalternativ) Kolumnen med **Besöksymbol** kan läsas av en skärmläsare om den flyttas längst åt vänster i den sparade användarvyn.

## 7.21 Fullständig operativ vägledning

Fullständig operativ vägledning finns tillgänglig i *Auditbase användarhandbok*. Detta dokument är tillgängligt i hjälpmenyn som beskrivs ovan.

## 7.22 Patientjournaler vid användning av laptop-synkronisering

När en patient kopieras till offlinedatabasen markeras den i den centrala databasen som "På laptop". Användare kommer att varnas för detta när patienten väljs som den globala. När en patients post är markerad som offline kan användaren i den centrala databasen fortsätta arbeta utan avbrott och göra ändringar i informationen där.

Information som registrerats i den centrala databasen kan inte ändras på den bärbara versionen. Endast ytterligare information och sessioner kan registreras på den bärbara datorn, vilket förhindrar att eventuella redigeringskonflikter inträffar samtidigt mellan den centrala databasen och den bärbara databasen. Det finns ett undantag för tvådelade frågeformulär, som COSI och GHABP. Även om de tekniskt sett är en post, kan den andra delen redigeras på den bärbara datorn efter att den första delen har laddats från den centrala databasen. I så fall:

- Användare i huvuddatabasen får en specifik varning när de försöker redigera Glasgow- eller COSI-frågeformuläret för en patient på den bärbara datorn.
- Under synkronisering av den bärbara datorns databas med den centrala databasen skriver systemet över data i den centrala databasen med data från den bärbara datorn för dessa frågeformulär. Om användare slutför den andra delen i både den centrala databasen och på den bärbara datorn samtidigt, kommer data från den bärbara datorn att råda. Men om frågeformuläret inte modifierades på den bärbara datorn, kommer alla ändringar som gjorts i den centrala databasen inte att gå förlorade.

Nya patienter kan skapas i den bärbara databasen och antingen läggas till som nya poster i den centrala databasen eller slås samman med befintliga poster under synkroniseringen. Information som demografi i den centrala databasen bevaras och ersätts inte av information från den bärbara databasen.

## 7.23 Sluta använda Auditbase och avyttring

Om användare ska sluta använda Auditbase på någon arbetsstation rekommenderas att vidta följande åtgärder:

- Avinstallera Auditbase med Windows standardfunktion Lägg till/Ta bort program.
- Om en installationskälla finns på arbetsstationen rekommenderas att ta bort den efter avinstallationen.
- Kontakta din lokala IT-avdelning för hjälp.

Om hela platsen beslutar att sluta använda Auditbase:

- Åtgärderna ovan måste vidtas på varje dator där Auditbase är installerat.
- Installationskällorna måste tas bort från platserna där produkter som används finns lagrade men får arkiveras på platser avsedda för arkivering.
- Auditbase centrala databas måste bevaras under den tidsperiod som föreskrivs av lokal lag. Auditdata är inte kvalificerat att ge råd om denna tidsperiod; lokala lagar angående

bevaring av personlig medicinsk information måste följas. Efter det måste databasen tas bort på sådant sätt att data inte kan återställas med den bästa praxis för den tidpunkten som används av den lokala IT-avdelningen eller dess leverantörer. Kontakta din lokala IT-avdelning för hjälp.

## 8 Felsökningsguide

Om du har några problem med att installera eller köra programvaran, gå igenom denna guide först innan du kontaktar en supporter/HOT-line.

Kontrollera att installationsförutsättningarna är uppfyllda. För detaljer, se [Bilaga A](#).

Om alla installationskrav har uppfyllts och du fortfarande har problem med din programvara, se tabellerna nedan för att lösa ditt problem.

### SQL-fel

| Problem                                                               | Lösning                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9268 – Cannot connect                                                 | Kontakta din lokala IT-avdelning för att kontrollera nätverket, servern och tjänsten Gupta SQLBase på servern.*                                                                                                                                     |
| 9024 – Session ended abnormally                                       | Kontakta din lokala IT-avdelning för att kontrollera nätverket, servern och tjänsten Gupta SQLBase på servern. *                                                                                                                                    |
| 9028 – Session ended abnormally                                       | Kontakta din lokala IT-avdelning för att kontrollera nätverket, servern och tjänsten Gupta SQLBase på servern. *                                                                                                                                    |
| 1102 – Security violation attempting to access                        | Välj felet för att visa vilken tabell som påverkas. Tilldela lämpliga tabellrättigheter i Systemadministrationsverktyget -> Användare, säkerhet och vyer -> Användaradministration och säkerhet -> Användarrättigheter och inställningar -> Roller. |
| 803 - Fatal SQLBase System Failure                                    | Stoppa all Auditbase-aktivitet. Kontakta Auditbase support.                                                                                                                                                                                         |
| 805 – Insert/update of unique constrained columns with duplicate data | Kontakta Auditbase support.                                                                                                                                                                                                                         |

\* Om inga problem hittas, kontakta Auditbase support på [support@auditdata.com](mailto:support@auditdata.com)

## Noahproblem


| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>För versioner lägre än 5.4.2 endast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hörapparatusens serienummer går ej att läsa med Phonak Target 7.1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Ansök om uppgradering hos <a href="mailto:support@auditdata.com">support@auditdata.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Noah-tokenfel när du loggar in på Auditbase.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ändra ditt lösenord från Bokning -&gt; Systeminställning -&gt; Ändra lösenord. Upprepa om meddelandet visas igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lösenordet kan inte ändras av systemadministratören.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>För Noahversioner lägre än 4.13 (Auditbase version 6.1.0).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noah validering misslyckades (500)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>See <a href="#">Noah's Data Valideringsfel</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Noah problems efter uppgradering av Windows 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ett problem med Noah initiering efter en uppgradering av Windows 10 (t.ex., från version 1809 till 1903), oavsett version av Windows 10.</li> <li>En uppgradering tar bort behörigheten "Full kontroll" från "Autentiserade Användare" i registermappen HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface som används för anslutning till Noah.</li> </ul> | <p>Det finns 4 sätt att lösa problemet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lägg till behörigheten "Full kontroll" för "Autentiserade användare" i registermappen HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface. <ol style="list-style-type: none"> <li>Öppna registereditorn.</li> <li>Gå till HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface.</li> <li>Högerklicka på mappen NoahDBInterface och välj "Behörighet".</li> <li>Klicka "Lägg till" för att lägga till "Autentiserade användare".</li> <li>Lägg till "Full Kontroll" för "Autentiserade användare" och klicka "OK".</li> </ol> </li> <li>Kör AddNoahPermissionToRegistry.exe som Administratör från mappen AuditBase CD</li> </ol> |

| Problem | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>image\Auditbase\NOAH\RestoreRegistryPermission.</p> <p>3. Kopiera alla filer från AuditBase CD<br/>image\Auditbase\NOAH\RestoreRegistryPermission, läs filen readme.txt från det bifogade arkivet och kör<br/>AddNoahPermissionToRegistry.bat som<br/>Administratör.</p> <p>4. Installera om Auditbase.</p> |

## Miscellaneous

| Problem                                                                 | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditbase är endast kompatibel med Windows 10 från version 6.x.x        | Ansök om uppgradering via email till <a href="mailto:support@auditdata.com">support@auditdata.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fler användare inloggade än vad licensen tillåter                       | <p>Kontrollera anslutningar i<br/><i>Systemadministrationsverktyget</i> -&gt; <i>Verktyg</i><br/><i>menyalternativ</i> -&gt; <i>Övervaka anslutningar</i>.</p> <p>Koppla bort valda användare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bokstäver för kortkommandon på knappar och flikar saknar understrykning | <p>Detta styrs nu av inställningarna i Windows. Om bokstäverna inte är understruken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I Windows 10, gå till <i>Inställningar</i> -&gt; <i>Hjälpmedel</i> -&gt; <i>Tangentbord</i> och slå sedan på alternativet "Visa understreck för snabbtangenter när det finns".</li> <li>I Windows 7, gå till Kontrollpanelen -&gt; <i>Hjälpmedel</i> -&gt; <i>Ändra hur ditt tangentbord fungerar</i> och slå sedan på alternativet "Understrykning av kortkommandon och åtkomsttangenter".</li> </ul> |
| Felaktig version av gswag32.dll                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiera filerna gswag32.dll, gswdll32.dll, från: C:\Program Files (x86)\Gupta\Runtime62\</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problem                               | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Klistra in dom i mappen: C:\Windows\SysWOW64\</li></ul> <p>Repetera på varje PC där felet uppträder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Installera 64-bitars ODBC-drivrutiner | <p>För varje PC där du behöver använda 64-bitars ODBC-anslutningen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Se till att 'Aktivera drivrutin' INTE är markerad i Auditbase Administration (eftersom detta bara är för 32-bitars ODBC-anslutningen). Det kommer inte att vara markerat som standard.</li><li>Installera C++ 64-bitars runtime-bibliotek genom att köra filen <code>vcredist_x64.exe</code><br/><br/>Finns även från:<ul style="list-style-type: none"><li>Ladda ner <a href="#">Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update</a> från Microsofts officiella nedladdningscenter (välj x64-versionen)</li><li>Högerklicka och välj 'Kör somAdministratör' för att installera</li></ul></li><li>Kör 'Gupta SqlBase 64-bit drivers.msi' för tt installera Auditbase 64-bit ODBC drivers.<br/><br/>Dessa drivers finns i Auditbase installation, som går att finna på din servera vid:<ul style="list-style-type: none"><li>\\twhaudio01\AB Install\Auditbase 6.0.3.2.12346\Database\SqlBase drivers x64 setup</li></ul></li><li>Skapa 64-bitars ODBC-anslutningen manuellt:<ul style="list-style-type: none"><li>Öppna 64-bitars ODBC Administratör från C:\Windows\System32\odbcad32.exe</li><li>Välj fliken 'Användar DSN' och välj 'Lägg till'</li><li>Välj drivern 'Gupta SQLBase 12.2 (64-bit),</li></ul></li></ol> |
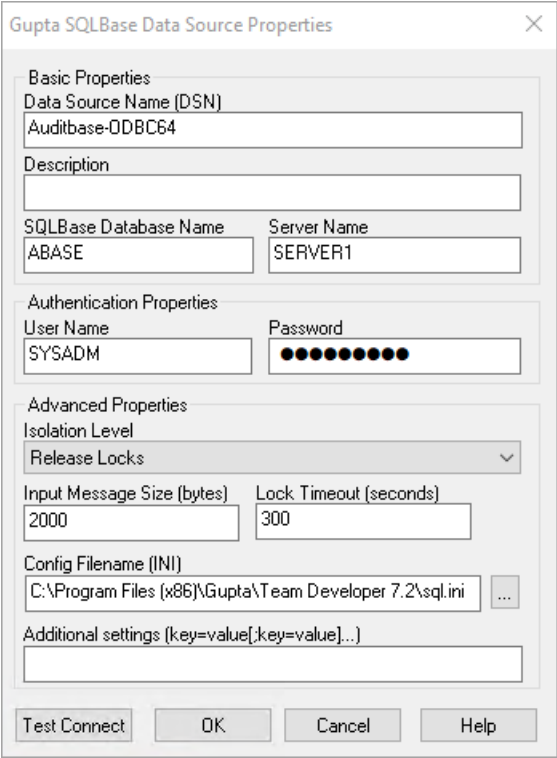
| Problem                                                                                                                  | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <p>och klicka sedan 'Avsluta'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Konfigurera' datakällan enligt nedan</li> <li>• Klicka 'Testa Anslutning' för att se om det fungerar</li> </ul>  <p>När anslutningen fungerar bör du kunna ansluta till Auditbase ODBC från 64-bitars applikationer (t.ex. MS Access).</p> |
| <p>Problem med att skriva ut RPT-rapporter från AB med Crystal 11 installerat. QRP-rapporter skrivs ut utan problem.</p> | <p>Problemet orsakas av en felaktig Crystal XI-runtime som kan installeras tillsammans med vissa MS-produkter.</p> <p>För att lösa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avinstallera Crystal Reports XI runtime</li> <li>2. Installera Crystal Reports XI från Auditbase installationsmedia \Auditbase\CRXIRuntime.msi</li> </ol>                                                               |



## 9 Operatörsroller och aktiviteter

### 9.1 Operatörsroller

Det följande är operatörens roller som allmänt förväntas vara inblandad i distribution, service och andra aktiviteter för Auditbase.

- Applikationsdistribution – ansvarig för distributionen av applikationer för stationära datorer (inklusive genom MSI-paket om det krävs).
- Auditbase-administratör – ansvarig för konfiguration och färdigställning av Auditbase inklusive skapa, administrera och auktorisera användare.
- IT-säkerhet – ansvarig för att underhålla IT-säkerheten.
- Databasadministratör – ansvarig för säkerhetskopieringar av databas.
- Klinisk säkerhetsansvarig – ansvarig för klinisk säkerhet.

### 9.2 Operatörsaktiviteter och rekommenderad frekvens

| Operatörsroll            | Aktivitet                                                                                               | Rekommenderad frekvens                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Applikationsdistribution | Installation av klientapplikation                                                                       | Vid installation                                   |
| Auditbase-administratör  | Konfigurera användarbehörigheter; uppdatera deras behörigheter genom att ändra relevanta användarroller | Vid nya användare och efter funktionsuppdateringar |
| Auditbase-administratör  | Upphävning av användare                                                                                 | Användare som lämnar                               |
| Auditbase-administratör  | Utvärdering av revisionsloggar                                                                          | Efter behov                                        |
| Auditbase-administratör  | Användarutbildning om kontosäkerhet och lösenordshantering                                              | Vid nya användare och efter funktionsuppdateringar |
| IT-säkerhet              | Hålla antivirus- och malware-skydd uppdaterade                                                          | Dagligen                                           |
| IT-säkerhet              | Säkerställa att säkerhetskorrigeringar för operativsystemet är uppdaterade                              | Veckovis                                           |
| Databasadministratör     | Övervaka säkerhetskopiering                                                                             | Dagligen                                           |

| Operatörsroll                                         | Aktivitet                                                     | Rekommenderad frekvens |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Databasadministratör                                  | Verifiera säkerhetskopiering                                  | Efter behov            |
| Databasadministratör                                  | Förbereda för återställning av säkerhetskopia                 | Efter behov            |
| IT-säkerhet/ Auditbase-administratör                  | Informera Auditdata om relevanta säkerhetsincidenter          | Efter behov            |
| Auditbase-administratör/<br>Klinisk säkerhetsansvarig | Informera Auditdata om relevanta kliniska säkerhetsincidenter | Efter behov            |
| IT-säkerhet                                           | Utbyte av nycklar eller certifikat                            | Efter behov            |

## Bilaga A



Det är viktigt att affärsprocessen säkerställer att adekvata resurser tillhandahålls för klientdatorer enligt minimisystemkraven nedan.

Checklistan för före-installation eller före-uppgradering av Auditbase måste vara noggrant slutförd.

### A.1 Serverspecifikationer

#### A.1.1 Hårdvarukrav

Virtuella servrar och SAN-lagring stöds fullt ut av Auditbase.

Minimispecifikationen är inriktad på befintliga installationer som ska uppgraderas och bör diskuteras med Auditdata support. Nya installationer bör alltid använda den rekommenderade specifikationen eller högre beroende på antalet användare.

| Hårdvaru-komponent           | Minimum                                          | Rekommenderat                                                  | Kommentar            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 - 10 samtidiga användare   |                                                  |                                                                |                      |
| Processor                    | Xeon Dual Core 1.5 GHz<br>t.ex., E3 v31 familj   | Xeon Dual Core 2.0 GHz<br>t.ex., E3 v31 familj eller högre     | Virtuell stöds       |
| RAM                          | 6 GB                                             | 12 GB                                                          |                      |
| 10 - 200 samtidiga användare |                                                  |                                                                |                      |
| Processor                    | 2 Xeon Quad Core 2.0 GHz<br>t.ex., E7 v21 familj | 2 x Xeon Quad Core 2.0 GHz<br>t.ex., E7 v21 familj eller högre | Virtuell stöds       |
| RAM                          | 8 GB                                             | 12 GB                                                          |                      |
| Alla användare               |                                                  |                                                                |                      |
| HDD Typ                      | SSD                                              | Snabb SSD                                                      | Snabb SSD förbättrar |

| Hårdvaru-komponent | Minimum                      | Rekommenderat                 | Kommentar                    |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                    |                              |                               | prestandan avsevärt          |
| HDD-utrymme        | DB(ernas) storlek x 3 + 5 GB | DB(ernas) storlek x 5 + 10 GB | Sammanlagd aktiv DB-storlek. |
| USB                | 2.0                          | 3.0                           |                              |

### A.1.2 Mjukvarukrav

| Mjukvaru-Komponent  | Beskrivning                                                                                  | Kommentar                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativsystem      | Windows 2022 Server<br>Windows 2019 Server<br>Windows 2016 Server                            | För 64-bitars server måste 32-bitars applikationsstöd vara aktiverat för att kunna köra viktiga verktyg.<br><br>Alla Microsoftuppdateringar bör installeras.<br><br>Windows 2022 Server stöds endast för SQLBase 12.3.0 |
| Konfiguration       | Konfigurera som 'Applikationsserver' och inte 'Fildelning' om möjligt.                       | 'Fildelning' kommer att reservera 41% av systemminnet.                                                                                                                                                                  |
| Databasmotor        | Gupta SQLBase 12.3.1<br>Gupta SQLBase 12.3.0<br>Gupta SQLBase 12.2.3<br>Gupta SQLBase 12.2.2 | Levereras av Auditdata.<br><br>Minst en port måste vara tillgänglig för anslutning till SQLBase, vanligtvis 2155.                                                                                                       |
| Active Directory    | Frivilligt.                                                                                  | Auditbaseintegration med Active Directory är testat på Windows server 2016, Active Directory Schema 87.                                                                                                                 |
| Back-up-faciliteter | Ett dokument som beskriver rekommenderade säkerhetskopierings-                               | Auditdata kan ge rekommendationer om hur                                                                                                                                                                                |

| Mjukvaru-komponent | Beskrivning                                                                                                    | Kommentar                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | procedurer kan begäras via den normala Auditdata-kontakten eller via e-postbegäran till support@auditdata.com. | man utför säkerhetskopiering men kan inte implementera eller serva dessa rutiner.* |

\* Var medveten om att säkerhetskopiering av Auditbase-server helt och hållet är den lokala IT-avdelningens ansvar och att Auditdata inte kan hållas ansvarigt för förlust av data till följd av otillräckliga eller felaktiga säkerhetskopieringsrutiner.

## A.2 Klientdatorns specifikationer (inklusive Noah installation)

### A.2.1 Hårdvarukrav

| Hårdvaru-komponent | Minimum                                    | Rekommenderat                  | Kommentar                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor          | Core i5                                    | Core i7                        |                                                                                                                                             |
| RAM                | 32 bit: 4 GB<br>64 bit: 4 GB               | 32 bit: 4 GB<br>64 bit: 10 GB  | En stor mängd minne krävs dessutom av Noahs anpassningsmoduler. Om andra applikationer eller tjänster körs samtidigt kommer mer att krävas. |
| HDD                | SSD 2 GB ledigt plus @1 Gb per Noah-modul. |                                | Rekommenderat av HIMSA.                                                                                                                     |
| Nätverkskort       | 100 Mb/s                                   | 1 Gb/s                         | Nätverkskrav, se nedan.                                                                                                                     |
| Grafikkort         | Widescreen 16:9<br>1920 x 1080             | Widescreen 16:9<br>2560 x 1440 |                                                                                                                                             |
| Etikettskrivare    |                                            | Seiko Smart Label Printer      | Zebraskrivare stöds inte.                                                                                                                   |

## A.2.2 Mjukvarukrav

| Mjukvaru-komponent   | Minimum                                                                                                  | Rekommenderat | kommentar                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativ-system      | Windows 10 (64 bit)*<br><br>Windows 11*                                                                  | Windows 11*   | Alla Microsoftuppdateringar bör installeras<br><br>*1) Kontakta tillverkaren för modul- eller audiometerpanelsupport;<br><br>2) Auditbase har testats på versionerna Win10 (22H2), Win11 (24H2), Win11 (25H2) och Windows 11 Insider Preview. |
| Ghosting             | Ghosting images av Windows stöds inte till följd av SID-problem.                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokument-editor      | Testat med:<br><br>Word för Microsoft 365 MSO (version 2511 bygge 16.0.19426.20218)                      |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skapa PDF            | Microsoft XPS Document Writer måste vara installerat på alla klienter för att generera system-PDF-filer. |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bitmapredigering     | 'MS Paint' måste vara installerad för redigering av audiogramsymboler.                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Noah-moduler         | Måste vara Noah4-certifierade.                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Webläsare            | Webbläsare Edge, Chrome, Firefox eller Safari krävs för att se online IFU och eLearning-moduler.         |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Java                 | Behövs ej.                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| .Net                 | 4.6.2 (installeras med Windows 10)<br><br>4.8 (installeras med Windows 11)                               |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adobe Acrobat Reader | Inga versionskrav                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                               |

## A.3 Klientdatorns specifikationer (utan Noahinstallation)

### A.3.1 Hårdvarukrav

| Hårdvaru-komponent | Minimum                        | Rekommendrat                   | Kommentar                                                                       |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processor          | Core i3                        | Core i5                        |                                                                                 |
| RAM                | 32 bit: 3.5 GB<br>64 bit: 4 GB | 32 bit: 3.5 GB<br>64 bit: 8 GB | Om andra applikationer eller tjänster körs samtidigt kommer mer RAM att krävas. |
| HDD                | 1 GB fritt                     | SSD 3 GB fritt                 |                                                                                 |
| Nätverkskort       | 100 Mb/s                       | 1 Gb/s                         | Nätverkskrav, se nedan.                                                         |
| Grafikkort         | Widescreen 16:9<br>1920 x 1080 | Widescreen 16:9<br>2560 x 1440 |                                                                                 |
| Etikettskrivare    |                                | Seiko Smart Label Printer      | Zebraskrivare stöds inte.                                                       |

### A.3.2 Mjukvarukrav

| Mjukvaru-komponent | Minimum                                                                             | Rekommenderat | Kommentar                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativsystem     | Windows 10 (64 bit)*<br><br>Windows 11*                                             | Windows 11*   | Alla Microsoftuppdateringar bör installeras<br><br>*Auditbase har testats på versionerna Win10 (22H2), Win11 (24H2), Win11 (25H2) och Windows 11 Insider Preview. |
| Ghosting           | Ghosting images av Windows stöds inte till följd av SID-problem.                    |               |                                                                                                                                                                   |
| Dokument-editor    | Testat med:<br><br>Word för Microsoft 365 MSO (version 2511 bygge 16.0.19426.20218) |               |                                                                                                                                                                   |

| Mjukvaru-komponent   | Minimum                                                                                                  | Rekommenderat | Kommentar |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Skapa PDF            | Microsoft XPS Document Writer måste vara installerat på alla klienter för att generera system-PDF-filer. |               |           |
| Bitmapredigering     | 'MS Paint' måste vara installerad för redigering av audiogramsymboler.                                   |               |           |
| Webläsare            | Webbläsare Edge, Chrome, Firefox eller Safari krävs för att se online IFU och eLearning-moduler.         |               |           |
| Java                 | Behövs ej.                                                                                               |               |           |
| .Net                 | 4.6.2 (installeras med Windows 10)<br>4.8 (installeras med Windows 11)                                   |               |           |
| Adobe Acrobat Reader | Inga versionskrav                                                                                        |               |           |

## A.4 Säkerhetsspecifikationer

### A.4.1 Kryptering

- Nätverkstrafik mellan Auditbase databas och klientdatorer kan krypteras med TLS1.2. Det rekommenderas för säkerheten att detta begärs.
- Auditbase SQLBase-databasen kan krypteras. Det rekommenderas för säkerheten att detta begärs. *Observera att detta kan ha en nedsättande effekt på prestandan.*
- Det krävs att HL7-gränssnitt mellan Auditbase och sjukhusystem är säkrade av kundens egen trafikryptering och skydd inom den egna privata nätverksdomänen.

### A.4.2 Antivirus och antimalware

- Det är väsentligt för säkerheten att antivirus- och antimalware-skydd finns installerat på varje dator där Auditbase används. Detta skydd måste uppdateras regelbundet.
- Det är väsentligt för säkerheten för att motverka risker om en dator blir infekterad av ett virus eller malware att användarna inte har några behörigheter på administratörsnivå i Windows som viruset eller malwareprogrammet kan dra nytta av.



### A.4.3 Windows-autentisering och lösenord

- Det är väsentligt för säkerheten att en metod med stark autentisering för inloggning till Windows används när inloggning med Active Directory Windows är aktiverat för Auditbase.
- Det är väsentligt för säkerheten att det avtvingas en policy för att hålla Windows lösenord säkert.

### A.4.4 Säkerhet för utskrifter

- För säkerheten rekommenderas att ett försättsblad konfigureras för utskrifter som skulle kunna innehålla för "PATIENTEN KONFIDENTIELL INFORMATION" på skrivare där utskrifter från Auditbase görs.

### A.4.5 Portskanning

- Auditdata föreslår vilka portar som ska användas för Auditdata-applikationer. Dessa kan ändras av kunden efter diskussion med supportpersonal från Auditdata om hur applikationen ska konfigureras om. Kunden är ansvarig för att säkerställa att portskanning utförs på alla relevanta nätverksgränssnitt.

## A.5 Nätverksspecifikationer

### A.5.1 Nätverksspecifikationer

**Bandbredd:** För bästa arbetsupplevelse krävs ca 10 Mbit per användare.

**Latens:** Prestanda minskar när latensen ökar. En latens på 0-20 ms rekommenderas; en latens på över 35 ms kommer att resultera i verkliga förseningar som kan märkas av användarna. En latens över vissa höga värden (100 ms/200 ms, beroende på nätverkstyp och tillämpningsområde) kommer att medföra ett brott i anslutningen och programmet måste startas om.

**Brott i anslutningen:** En nätverksanslutningen måste alltid föreligga, annars måste applikationen startas om. En Auditbase-anslutningslicensering omfattar inte brott i anslutningen och licensnummeröverträdelser kan inträffa under sådana förhållanden.

**Datapaketförlust:** TCP-hantering klarar av en begränsad förlust av datapaket. En förlust på 5 % resulterar i en märkbar fördröjning och cirka 50 % resulterar i ett brott i anslutningen.

### A.5.2 Namngivning av klientarbetsstationer

**Rekommendation:** Arbetsstationernas namn ska ha unika sista 8 tecken. Detta behövs för att effektivt spåra de licenser för Auditbase som används och, eventuellt, frigöra hängande

anslutningar från samma användare från samma arbetsstation.

## A.6 Risker för utrustning och nätverk samt konfigurationsändringar

Vid eventuell utbyte av utrustning och omarbetning av nätverkskonfiguration, eller möjliga programfixar vad gäller t.ex. Windows, antivirus- eller brandväggsprogram, rekommenderar vi starkt att ändringarna genomförs på ett sätt så att de minimikrav som beskrivs ovan fortfarande uppfylls. Hänsyn måste också tas till att alla ändringar eller programfixar av ovanstående fortfarande kommer att stödja systemets säkerhetsmål och säkerhetsfunktioner.

Om Auditbase körs på utrustning eller nätverk som inte uppfyller minimikraven kan det medföra följande konsekvenser:

- Låg systemprestanda, vilket kan orsaka förseningar i patienternas behandling och informationsläckage.
- Systemkrasch, vilket kan orsaka förlust av osparade data.


Generellt varnas kunderna för att en användning av systemet i en miljö vilken inte uppfyller minimikraven kan orsaka tidigare oidentifierade risker för patienter, användare och tredje part. Kunderna är själva ansvariga för analysering och utvärdering av risker relaterade till befintlig eller ändrad IT-infrastruktur.

Förändringar i IT-nätverket inkluderar:

1. Förändringar i IT-nätverkskonfigurationen,
2. Tillägg av IT-objekt (hårdvara och/eller programvaruplattformar eller programvaruapplikationer) till IT-nätverket,
3. Avlägsnande av IT-objekt från IT-nätverket,
4. Uppdatering av hårdvara och/eller programvaruplattformar eller programvaruapplikationer i IT-nätverket,
5. Uppgradering av hårdvara och/eller programvaruplattformar eller programvaruapplikationer i IT-nätverket.

## A.7 Informationsflöde

### A.7.1 Informationsflöde - diagram

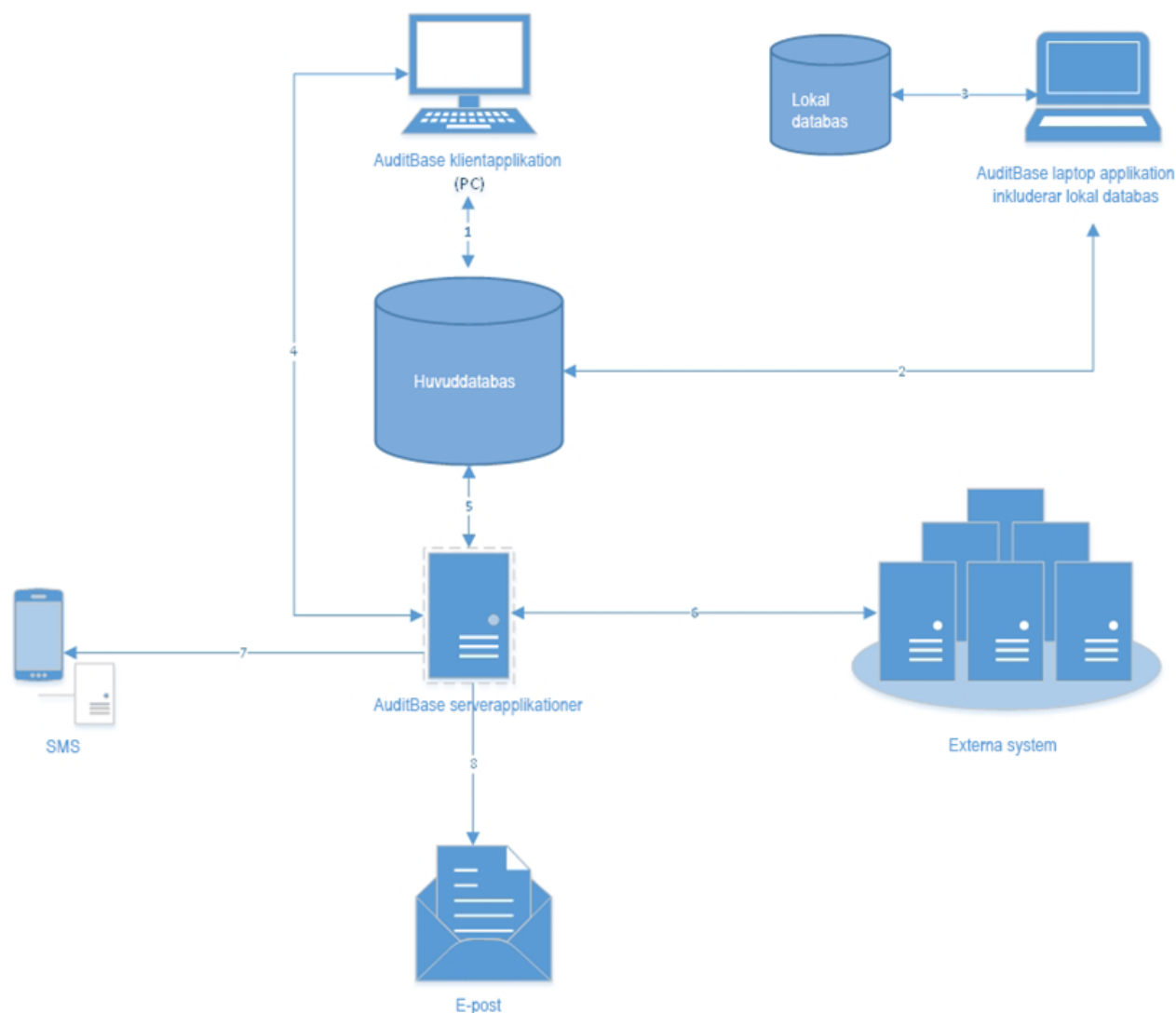

### A.7.2 Informationsflöde - tillträden

| Namn                             | Beskrivning                                                                                                | Person-uppgifter                                     | Lagring |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Auditbase klientapplikation (PC) | Windows GUI-applikation för Auditbase-klient. Verkar i det lokala nätverket, ansluter till huvuddatabasen. | Ja.<br><br>Användare läser och anger personuppgifter | Nr      |

| Namn                                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Person-uppgifter       | Lagring                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | med denna applikation. |                                       |
| Auditbase Laptop-applikation, inklusive lokal databas | Auditbase-klientapplikation konfigurerad för drift utanför det lokala nätverket.<br><br>Inkluderar ett lokal databaslager för lagring av data.                                                                                                                                                 | Ja                     | Ja                                    |
| Huvuddatabas                                          | Databasen där all data lagras.<br><br>Ägaren till databasen är kunden. Det är kundens ansvar att bevara uppgifterna.                                                                                                                                                                           | Ja                     | Ja                                    |
| Lokal databas                                         | Databasen används som en del av Auditbase Laptop-applikationen.<br><br>Innehåller data om ett mycket begränsat antal patienter.<br><br>Ägaren till databasen är kunden. Det är kundens ansvar att bevara uppgifterna.                                                                          | Ja                     | Ja                                    |
| Auditbase-serverapplikationer                         | Olika fristående applikationer som används för gränssnittsändamål.                                                                                                                                                                                                                             | Ja                     | Beror på vilka gränssnitt som används |
| Externa system                                        | Auditbase har gränssnitt till externa informationssystem. Detta kan inkludera: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Patientadministrationssystem (PAS) för utbyte av demografiska uppgifter och tidsbeställningsinformation.</li> <li>◦ Dokumentlagringssystem.</li> <li>◦ Etc.</li> </ul> | Ja                     | Ja                                    |
| SMS                                                   | SMS skickas till patienter för                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konfigurerbar          | På patientens                         |

| Namn   | Beskrivning                                             | Person-uppgifter | Lagring                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        | påminnelse om tid.                                      |                  | mobiltelefon enligt dennes/dennas konfiguration |
| E-post | Dokument som e-postats till patienter och andra parter. | Ja               | Mottagarens ansvar.                             |

### A.7.3 Informationsflöde - beskrivning

| Nummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personuppgifter som blir behandlade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Windows GUI-applikationen för Auditbase-klient läser och skriver data till huvuddatabasen. Operationer utförs i det lokala nätverket.                                                                                                                                       | Ja                                  |
| 2      | Auditbase Laptop-applikationen (konfigurerad för drift utanför det lokala nätverket) läser data från huvuddatabasen för vidare kopiering till Laptop-databasen. Den synkroniserar också modifierad data med huvuddatabasen. Dessa funktioner utförs i det lokala nätverket. | Ja                                  |
| 3      | Auditbase Laptop-applikation (konfigurerad för drift utanför det lokala nätverket) läser och skriver data till den bärbara datorns databas. Funktionerna utförs i en bärbar dator.                                                                                          | Ja                                  |
| 4      | Windows GUI-applikationen för Auditbase-klient begär data från serverns fristående applikationer och får ett svar.                                                                                                                                                          | Ja                                  |
| 5      | Auditbase-serverapplikationer läser och skriver data till huvuddatabasen för gränssnittsbehov.                                                                                                                                                                              | Ja                                  |
| 6      | Auditbase-serverapplikationer utbyter data med externa system.                                                                                                                                                                                                              | Ja                                  |
| 7      | Auditbase-serverapplikationen skickar SMS till patienter                                                                                                                                                                                                                    | Konfigurerbar                       |

| Nummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personuppgifter som blir behandlade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        | med hjälp av e-post eller webbtjänster som tillhandahålls av kunden.                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 8      | Auditbase serverapplikationen skickar e-post till patienter och andra parter med hjälp av e-posttjänsten som tillhandahålls av kunden. Auditbase serverapplikationen skickar e-post till patienter och andra parter som använder e-posttjänsten som tillhandahålls av kunden. | Ja                                  |

## Bilaga B

### B.1 Tillverkare och System Data

SaMD Auditbase System tillverkas och säljs i EU av:

**Huvudkontor:**

Auditdata A/S

Wildersgade 10B, 1408 København K, Danmark

Telefon: +45 70203124

[www.auditdata.com](http://www.auditdata.com)



2003 Auditbase

**Dokumentations version:**

Auditbase System dokumentations version (IFU): DN02189/13

**Symboler som används i systemet, dess paketering och i dokumentation:**

Se sektionen [Använda symboler](#) för en översikt av de symboler som används.

## B.2 Tolkning av etikettecken

### B.2.1 Etikettexempel



### B.2.2 Nyckel för märkning

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Auditbase      | Typ av enhet                           |
| Version 6.10.0 | Enhetens version                       |
|                | Tillverkarens adress                   |
| CE 0123        | CE-märkning och nummer på anmält organ |
| 2003 Auditbase | Produktnamn (Typetikett)               |
|                | Varning i Om-rutans märkning           |
| MD             | Medicinteknisk produkt                 |
| eIFU Indicator | Elektronisk bruksanvisning (e-IFU)     |



*OBS: Licenslistan är dynamisk och varierar beroende på licensinnehållet för varje kund.*